

Vejledning til flow+ RIC-høreapparater (højttaler i øret)



Tak

Tak, fordi du har valgt dette høreapparat.

Denne brugervejledning gælder for de følgende modeller:

Lanceringsår: 2020

flow+ S312

Dit høreapparat

Hørespecialist: _____

Telefonnummer: _____

Model: _____

Serienummer: _____

Batteristørrelse: 312

Garanti: _____

Program 1 er til: _____

Program 2 er til: _____


Program 3 er til: _____

Program 4 er til: _____


Købsdato: _____

Oversigt

Lavt batteri-advarsel

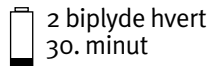

Batteristørrelse

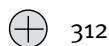

Tænd/Sluk


Tændt



Slukket




Udskiftning af batterier

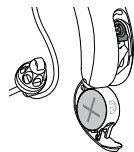

Batteriindikator

Trykknop

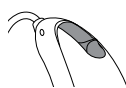

- ☐ programskift
- ☐ lydstyrkekontrol

Indholdsfortegnelse

Overblik over dit høreapparat	2
Advarsler	4
Tinnitusmasker	11
Sådan sætter du høreapparaterne på ørerne	14
Sådan tænder/slukker du dit høreapparat	16
Batterioplusninger	17
Betjeningsinstruktioner	20
Tinnitusmasker	24
Trådløs synkronisering	25
Sådan bruger du telefonen	25
Sådan plejer du dit høreapparat	26
Ekstra hørehjælpemidler	30
Fejlfindingsvejledning	31
Oplysninger om og forklaring af symboler	35
Overensstemmelsesoplysninger	38
Din tilbagemelding	40
Yderligere bemærkninger	41

Overblik over dit høreapparat

- 1 **Ledning** – tilslutter højttalerenheden til dit høreapparat
- 2 **Mikrofoner** – lyden kommer ind i høreapparaterne via mikrofonerne
- 3 **Trykknop** – skifter mellem høreprogrammer eller ændrer lydniveauet afhængigt af din tilpassede indstilling
- 4 **Batteriskuffe (on & off)** – luk skuffen for at tænde dit høreapparat, åben skuffen helt, for at slukke dit høreapparat eller for at skifte batteriet
- 5 **Lydkuppel** – holder højttalerenheden på plads i øregangen
- 6 **Fastholdelsesstykke** – forhindrer lydkuplen og højttalerenheden i at falde ud af øregangen
- 7 **Højttalerenhed** – forstærker lyden og sender den direkte ind i øregangen
- 8 **Specialfremstillet øreprop** – holder høreapparatet på plads

flow+ S312-høreapparat



Advarsler

- ⚠ Høreapparaters tilsigtede anvendelse er at forstærke og transmittere lyd til ørerne og herved kompensere for nedsat hørelse. Høreapparatet (programmeret specielt til hvert enkelt høretab) må kun anvendes af den tilsigtede person. Det må ikke anvendes af andre, da det kan skade deres hørelse.
- ⚠ Høreapparatet bør kun anvendes efter din læges eller hørespecialistens anvisninger.
- ⚠ Høreapparatet genskaber ikke en normal hørelse, og det modvirker eller forbedrer ikke en hørenedsættelse, der stammer fra organbetingede omstændigheder.
- ⚠ Du må ikke anvende dit høreapparat i områder med eksplosionsfare.
- ⚠ Allergiske reaktioner i forbindelse med brug af høreapparater er usandsynlige. Men hvis du oplever kløe, rødme, ømhed, inflammation eller en brændende fornemmelse i eller omkring dine ører, bør du informere din hørespecialist og kontakte din læge.

- ⚠ Hvis der er dele tilbage i øregangen, når høreapparatet er taget af, hvilket er højst usandsynligt, skal du straks søge læge.
- ⚠ Særlige medicinske eller dentale undersøgelser, herunder stråling, beskrevet herunder kan påvirke den korrekte funktion af dit høreapparat negativt. Fjern og opbevar det uden for undersøgelseslokalet/-området, inden der foretages:
 - Medicinsk eller dental undersøgelser med røntgen (herunder CT-scanning).
 - Medicinske undersøgelser med MR-/NMR-scanninger, der genererer magnetfelter.
 - Høreapparatet behøver ikke blive fjernet ved passage gennem sikkerhedsporte (lufthavne etc.). Hvis røntgen overhovedet bruges, vil det være i meget lave doser og vil ikke påvirke høreapparatet.
- ⚠ Du bør være særligt opmærksom på brugen af høreapparat, når det maksimale lydniveau overstiger 132 decibel. Der kan være en risiko for at skade din resterende hørelse.

Tal med din hørespecialist for at sikre, at den maksimale lyd i dit høreapparat passer til netop din hørenedsættelse.

Batteriadvarel

- ⚠ Efterlad aldrig dit høreapparat eller batterier et sted, hvor små børn eller dyr kan nå dem. Tag aldrig høreapparater eller batterier i munden. Hvis et høreapparat eller batteri sluges, skal du straks søge læge.

Forholdsregler

- ① Brugen af høreapparat er kun en del af genetableringen af din hørelse. Lydøvelser og vejledning i mundaflæsning kan også være påkrævet.
- ① I de fleste tilfælde giver uregelmæssig brug af høreapparater ikke fuldt udbytte. Når du har vænnet dig til høreapparatet, bør du bruge det hele dagen hver dag.
- ① Dit høreapparat anvender de mest moderne komponenter for at give den bedst mulige lyd kvalitet i alle lydsituationer.

Kommunikationsenheder som f.eks. mobiltelefoner kan skabe interferens (en summelyd) i høreapparatet. Hvis du oplever interferens fra en mobiltelefon, der anvendes i nærheden, kan du minimere dette på en række forskellige måder. Skift dit høreapparat til et andet program, drej hovedet i en anden retning, eller find ud af, hvilken mobiltelefon der skaber interferens, og bevæg dig væk fra den.

- ① Beskyt høreapparater mod varme (efterlad dem aldrig i nærheden af et vindue eller i bilen). Brug aldrig en mikrobølgeovn eller andre varmeapparater til at tørre dit høreapparat (pga. risiko for brand eller eksplosion). Spørg din hørespecialist om egnede tørringsmetoder.
- ① Kuplen skal udskiftes hver tredje måned, eller når den bliver stiv eller skør. Dette er for at forhindre, at kuplen løsner sig fra slangens studs under indføring i eller fjernelse fra øret.
- ① Tab ikke dit høreapparat. Hvis du taber dit høreapparat på en hård overflade, kan det blive beskadiget.

Bemærkning til hørespecialisten

⚠ Lydkupler må aldrig sættes på klienter med perforerede trommehinder, blotlagte kaviteter i mellemøret eller øregange, der er ændret af kirurgisk vej. I tilfælde af sådanne forhold anbefaler vi at bruge en specialfremstillet øreprop.

Mærkning

Serienummeret og fremstillingsåret er placeret under den farvede mærkning på høreapparat.

Kompatibilitetsvurdering af mobiltelefon

Nogle høreapparatbrugere har rapporteret en summende lyd i deres høreapparater, når de bruger mobiltelefon, hvilket kan være tegn på, at mobiltelefonen og høreapparatet ikke er kompatible. I henhold til ANSI C63.19-standarden (ANSI C63.19-2011 – amerikanske nationale standardmetoder til måling af kompatibilitet mellem trådløse kommunikationsenheder og høreapparater) kan specifikke høreapparaters kompatibilitet med en mobiltelefon anslås ved at føje vurderingen af høreapparatets immunitet til vurderingen af mobiltelefonens udledninger. For eksempel ville summen af høreapparatets vurdering på 4 (M₄) og en telefonvurdering på 3 (M₃) resultere i en samlet vurdering på 7. Enhver kombineret vurdering, der svarer til mindst 5, vil give "normal brug." En kombineret vurdering på 6 eller derover vil indikere "fremragende ydeevne." Dette høreapparats immunitet er mindst M₄.

Udstyrets ydelsesmålinger, kategorier og systemklassificeringer er baseret på de bedste oplysninger, der er til rådighed, men kan ikke garantere, at alle brugere vil være tilfredse.

- ① Det individuelle høreapparats ydeevne kan variere afhængigt af de enkelte mobiltelefoner. Du skal derfor afprøve dette høreapparat med din mobiltelefon. Hvis du køber en ny telefon, skal du sørge for at afprøve den med dit høreapparat, inden du køber.

Tinnitusmasker

Tinnitusmasker benytter bredbåndslud til at give midlertidig tinnitus-lindring.

Tinnitusmasker – advarsler

- ⚠ Tinnitusmaskeren er en bredbåndsludgenerator. Den er et middel til lydberigelsesterapi og bruges som en del af et individuelt tilpasset tinnitusprogram til at yde midlertidig lindring for tinnitus.
- ⚠ Det underliggende princip ved lydberigelse er at producere en anden (lydstimulering) for at afhjælpe klientens fokus på sin tinnitus og derved undgå de ubehagelige reaktioner. Lydberigelse sammen med instruerende vejledning er en etableret metode til behandling af tinnitus.
- ⚠ Luftledende høreapparater til brug sammen med tinnitusmasker skal tilpasses af en hørespecialist, der har kendskab til diagnose og behandling af tinnitus.

- ⚠ Skulle du få bivirkninger ved brug af tinnitusmaskeren, såsom hovedpine, kvalme, svimmelhed eller hjertebanken, eller opleve en formindsket auditiv funktion, såsom formindsket tolerance over for høje lyde, forværring af tinnitus eller uklar tale, bør du ikke fortsætte med brug af apparatet, og du bør kontakte din læge.
- ⚠ Lydstyrken for tinnitusmaskeren kan indstilles til et niveau, der kan forårsage permanent høreskade ved længerevarende brug. Hvis lydstyrken på dit høreapparats tinnitusmasker er indstillet på et sådant niveau, skal du rådføre dig med din hørespecialist, som kan fortælle dig, hvor lang tid pr. dag du højst må anvende tinnitusmaskeren. Tinnitusmaskeren bør aldrig anvendes, hvis lydstyrken opleves ubehagelig.

Vigtige oplysninger


- ① Tinnitusmaskeren genererer lyde, som anvendes som del af dit individuelt tilpassede midlertidige tinnitus-administrationsprogram til at yde lindring for tinnitus. Det bør altid anvendes som foreskrevet af en hørespecialist, der er bekendt med diagnose og behandling af tinnitus.
- ① For at tage godt vare på deres helbred er det vigtigt for personer med tinnitus at få en ørelæges faglige vurdering, inden en lydgenerator anvendes. Formålet med en sådan vurdering er at sikre, at tinnitusfremkaldende sygdomme, der kan behandles medicinsk, påvises og behandles, før der iværksættes brug af en lydgenerator.
- ① Tinnitusmaskeren er beregnet til personer på 18 år eller derover, som oplever både hørenedsættelse og tinnitus.

Sådan sætter du høreapparaterne på ørerne

Dit høreapparat kan have en farvekode, der er angivet med et mærke på batterilågen: rød = højre øre; blå = venstre øre.


Høreapparater med lydkupler

1. Placér høreapparatet på øret.
2. Sæt en finger på ledningen dér, hvor den er fastgjort til lydkuplen, og skub forsigtigt lydkuplen ind i øregangen. Ledningen skal ligge fladt mod hovedet og må ikke stikke ud.
3. Hvis der er et fastholdelsesstykke, skal det placeres i øret, så det hviler nederst i øregangens åbning.

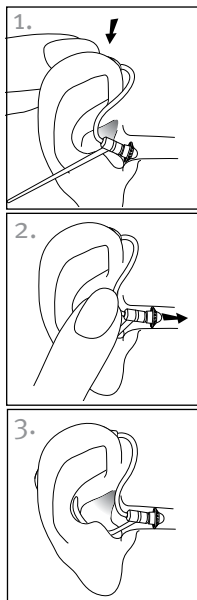

Høreapparater med specialfremstillede ørepropper

1. Hold den specialfremstillede øreprop mellem tommel- og pegefinger. Åbningen skal pege ind mod øregangen, mens høreapparatet hviler oven på øret.
2. Skub forsigtigt den specialfremstillede øreprop ind i øret. Øreproppen bør sidde tæt og behageligt i øret.
3. Placér høreapparatet oven på øret.

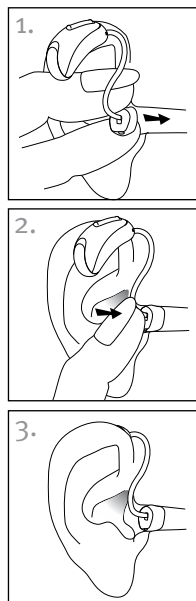


Sådan tænder/slukker du dit høreapparat

Batteriskuffen fungerer som en tænd- og sluknap.


1. **Tændt:** Luk batteriskuffen helt.

- ① Det kan tage op til fem sekunder, før høreapparaterne tændes. Din hørespecialist kan om nødvendigt øge opstartsforsinkelsen.

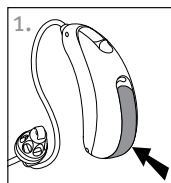

2. **Slukket:** Åbn batteriskuffen.

- ① Når du tænder og slukker høreapparaterne, mens de sidder på øret, skal du tage fat i den øverste og nederste del af enheden med pege- og tommelfinger. Brug pegefingeren på den modsatte hånd til at åbne og lukke batteriskuffen.

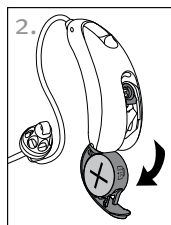

Batterioplysninger

Lavt batteri-advarsel





To lange biplyde indikerer, at batteriniveauet på høreapparatet er lavt. Når advarslen for lavt batteriniveau har lydt, kan lyden blive mindre klar. Dette er normalt og kan afhjælpes ved at skifte batterier.

Hvis ikke du kan høre den lave batteriadvarel, kan din hørespecialist ændre tonehøjden eller lydstyrken. Du kan også vælge at få fjernet advarslen helt.

- ① Dine høreapparater er designet til at generere en advarsel om lavt batteriniveau hvert 30. minut, indtil batterierne udskiftes, men afhængig af batteriernes tilstand kan de løbe tør, inden der udsendes en ny advarsel. Det anbefales derfor, at batterierne udskiftes så hurtigt som muligt efter den første advarsel.

Sådan udskiftes batteriet

1. Åben forsigtigt batteriskuffen med en fingernegl.
2. Skub batteriet mod den åbne side med en negl for at tage det ud.
3. Indsæt det nye batteri i batteriskuffen, så plustegnet (+) på batteriet peger samme vej som batteriindikatoren på batteriskuffen. Dette sikrer, at batteriskuffen lukkes korrekt.
- ① Hvis batteriet er indsat forkert, kan høreapparaterne ikke tændes.
4. Luk batteriskuffen.

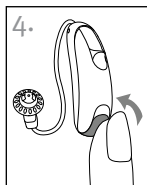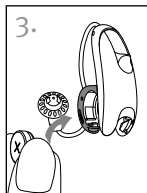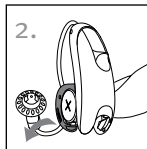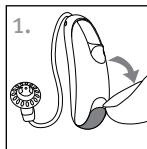

Pleje af batterier

- Bortskaf altid batterierne på en sikker og miljøvenlig måde.
- For at forlænge batteriets levetid skal du huske at slukke for dit høreapparat, når det ikke er i brug, specielt når du sover.
- Tag batterierne ud, og lad batteriskuffen være åben, når høreapparatet ikke bruges, specielt når du sover. Herved fordamper den indvendige fugt.

Betjeningsinstruktioner

Dit høreapparat er udstyret med en trykknop, der giver dig mulighed for at justere det yderligere.



Trykknop

Trykknappen på høreapparatet kan enten være en programkontrol, en lydstyrkekontrol eller en kombination af disse.

☐ Programkontrol

Hvis trykknappen er en programkontrol, skiftes der til et nyt program, hver gang du trykker på knappen.

Dit høreapparat bipper for at indikere, hvilket program du anvender.

Programindstilling	Biplyde
Program 1 (f.eks. AutoMic)	♪ 1 biplyd
Program 2 (f.eks. tale i støj)	♪♪ 2 biplyde
Program 3 (f.eks. telefon)	♪♪♪ 3 biplyde
Program 4 (f.eks. musik)	♪♪♪♪ 4 biplyde
Trådløs synkronisering (hvis aktiveret)	Det modsatte øre bipper det samme som den side, der justeres

Se listen over programmer forrest i denne brochure.

□ Lydstyrkekontrol

Hvis trykknappen er konfigureret som lydstyrkekontrol:

- Tryk på knappen på høreapparatet i højre side for at øge lydstyrken
- Tryk på knappen på høreapparatet i venstre side for at mindske lydstyrken

eller:

- Tryk på knappen for at gå igennem dine lydniveauer

Høreapparatet bipper, når du ændrer lydniveauet.

Lydstyrkeindstilling	Biplyde
Anbefalet lydniveau	 1 biplyd
Skruer op for lydstyrken	 kort bip
Skruer ned for lydstyrken	 kort bip
Maksimalt lydniveau	 2 biplyde
Minimum lydniveau	 2 biplyde

□ Trykknapp til program-/lydstyrkekontrol

Hvis din hørespecialist har konfigureret det ene høreapparat til at være en programkontrol og det andet høreapparat til at være en lydstyrkekontrol:

- Tryk på knappen på høreapparatet i □ højre/
□ venstre side for at tilgå dine forskellige programmer, og
- Tryk på knappen på høreapparatet i □ højre/
□ venstre side for at vælge lydniveau

Tinnitusmasker

Hvis din hørespecialist både har konfigureret et tinnitusmasker-program og en lydstyrkekontrol, kan du justere tinnitusmasker-niveauet, mens du befinder dig i tinnitusmasker-programmet. For at tilpasse støjniveauet skal du gøre et af følgende:

- Trykknep (højre/venstre)
 - Tryk på knappen på høreapparatet i højre side for at øge tinnitusmaskeren
 - Tryk på knappen på høreapparatet i venstre side for at mindske tinnitusmaskeren
- Trykknep (trin)
 - Tryk på knappen for at gå igennem de forskellige lydniveauer for tinnitusmasker

Høreapparatet bipper, når du ændrer niveauet.

Trådløs synkronisering

Hvis trådløs synkronisering er aktiveret, ændres lydstyrken eller programindstillingerne i begge høreapparater samtidig.

Hvis trykknappen f.eks. er konfigureret som programkontrol, og trådløs synkronisering er aktiveret, ændres programmet i begge høreapparater, når du trykker på knappen på det ene høreapparat.

Sådan bruger du telefonen

Din hørespecialist har muligvis konfigureret et telefonprogram på dit høreapparat, som du kan få adgang til ved at bruge trykknappen.

Sådan plejer du dit høreapparat

Sådan beskytter du dit høreapparat

- Åben batteriskufferne, når apparaterne ikke er i brug.
- Fjern altid dit høreapparat, når du anvender hårprodukter. Høreapparatet kan blive tilstoppet og ophøre med at fungere ordentligt.
- Du må ikke have høreapparatet på i bad eller sænke det ned i vand.
- Hvis dit høreapparat bliver vådt, må du ikke forsøge at tørre det i ovnen eller mikroovnen. Rør ikke ved nogen af kontrollerne. Åbn straks batterilågen, fjern batterierne, og lad høreapparatet lufttørre i 24 timer.
- Beskyt dit høreapparat mod ekstrem varme (hårtørre, bilens handskerum eller instrumentbræt).
- Sørg for, at ledningerne ikke bliver snoede eller klemte, når høreapparatet anbringes i etuiet.

- Regelmæssig brug af en affugter, såsom et Clean Dry-kit, kan hjælpe med at forebygge korrosion og forlænge høreapparatets levetid. Tag batterierne ud inden brug af en affugter.
- Undgå at tabe høreapparatet og at slå det mod hårde overflader.

Sådan rengøres høreapparatet

Brug en blød klud til at rengøre dit høreapparat sidst på dagen. Regelmæssig rengøring af mikrofonindgangene med den medfølgende rengøringsbørste sikrer, at dit høreapparat opretholder sin lydkvalitet. Din hørespecialist kan demonstrere dette for dig.

Anbring høreapparaterne i etuiet natten over med batteriskufferne åbne, så eventuel fugt kan fordampe.

- ① Ørevoks er naturligt og almindeligt. Det er vigtigt, at du dagligt sørger for, at dit høreapparat er frit for ørevoks.
- ① Du må ikke anvende alkohol til rengøring af dit høreapparat, ørepropperne eller lydkuplerne.
- ① Du må ikke anvende skarpe genstande til at løsne ørevoksen. Du kan beskadige høreapparatet eller ørepropperne, hvis du stikker husholdningsartikler ind i dem.

Rengøring af dine specialfremstillede ørepropper og lydkupler

Rengør hver dag lydkuplernes og øreproppernes yderside med en fugtig klud. Undgå at lade højttalerenheder og specialfremstillede ørepropper komme i kontakt med vand.



- ① Ledningerne, højttalerne, lydkuplerne og de specialfremstillede ørepropper må aldrig renses eller nedsænkes i vand, da vanddråber kan blokere for lyden eller beskadige høreapparatets elektriske dele.

Lydkupler bør udskiftes hver 3. til 6. måned, eller hvis de bliver stive, skrøbelige eller misfarvede.

Hvis dine ørepropper kræver yderligere rengøring, kan højttalerens ørevoksfilter være tilstoppet og skal derfor udskiftes. Tal med din hørespecialist.

Ekstra hørehjælpemidler

Hjælp til at høre på offentlige steder

Telespoler opfanger elektromagnetisk energi og omdanner den til lyd. Høreapparatets telespole kan hjælpe dig med at høre på offentlige steder, der er udstyret med et teleslyngesystem. Dette symbol betyder, at der er et teleslyngesystem på stedet, der kan være kompatibelt med dit høreapparat. Kontakt din hørespecialist for at få flere oplysninger om teleslyngesystemer.



Fejlfindingsvejledning

Årsag	Mulig løsning
Problem: ingen lyd	
Ikke tændt	Tænd
Lavt batteriniveau/ dødt batteri	Udskift batteriet
Dårlig batterikontakt	Henvend dig til din hørespecialist
Batteriet er sat i omvendt	Indsæt batteriet i henhold til batterisymbolet i batterilågen
Tilpassede ørepropper/lydkupler er tilstoppet med ørevoks	Rengør de tilpassede ørepropper/lydkupler. Se "Rengøring af dit høreapparat". Henvend dig til din hørespecialist
Tilstoppet mikrofon	Henvend dig til din hørespecialist

Årsag	Mulig løsning
-------	---------------

Problem: ikke højt nok

Lav lydstyrke	Skru op for lydstyrken, og kontakt din hørespecialist, hvis problemet fortsætter
---------------	--

Lavt batteriniveau	Udskift batteriet
--------------------	-------------------

De tilpassede ørepropper/lydkupler er ikke indsat korrekt	Se "Sådan sætter du høreapparater på ørerne." Fjern, og indsæt det igen forsigtigt
---	--

Hørelsen ændret	Henvend dig til din hørespecialist
-----------------	------------------------------------

Tilpassede ørepropper/lydkupler er tilstoppet med ørevoks	Rengør de tilpassede ørepropper/lydkupler. Se "Rengøring af dit høreapparat." Henvend dig til din hørespecialist
---	--

Tilstoppet mikrofon	Henvend dig til din hørespecialist
---------------------	------------------------------------

Problem: afbrudt lyd

Lavt batteriniveau	Udskift batteriet
--------------------	-------------------

Tilsmudset batterikontakt	Henvend dig til din hørespecialist
---------------------------	------------------------------------

Årsag	Mulig løsning
-------	---------------

Problem: to lange bilyde

Lavt batteriniveau	Udskift batteriet
--------------------	-------------------

Problem: hyletone

De tilpassede ørepropper/lydkupler er ikke indsat korrekt	Se "Sådan sætter du høreapparater på ørerne." Fjern, og indsæt det igen forsigtigt
---	--

Hånd/tøj tæt på øret	Fjern hånden/tøjet fra øret
----------------------	-----------------------------

De specialfremstillede ørepropper/lydkupler sidder dårligt	Henvend dig til din hørespecialist
--	------------------------------------

Problem: ikke klar, forvrænget

De specialfremstillede ørepropper/lydkupler sidder dårligt	Henvend dig til din hørespecialist
--	------------------------------------

Tilpassede ørepropper/lydkupler er tilstoppet med ørevoks	Rengør de tilpassede ørepropper/lydkupler. Se "Rengøring af dit høreapparat." Henvend dig til din hørespecialist
---	--

Lavt batteriniveau	Udskift batteriet
--------------------	-------------------

Tilstoppet mikrofon	Henvend dig til din hørespecialist
---------------------	------------------------------------

Årsag	Mulig løsning
-------	---------------

Problem: de specialfremstillede ørepropper/lydkupler falder ud af øret

De specialfremstillede ørepropper/lydkupler sidder dårligt	Henvend dig til din hørespecialist
--	------------------------------------

De specialfremstillede ørepropper/lydkupler er ikke indsat korrekt

Se "Sådan sætter du høreapparatet fast." Fjern, og indsæt det igen forsigtigt

Problem: lav lydstyrke på fastnettelefon

Telefonen er ikke placeret ordentligt	Flyt telefonen rundt om øret for at få et tydeligere signal
---------------------------------------	---

Høreapparatet skal justeres

Henvend dig til din hørespecialist

Kontakt din hørespecialist, hvis du har et problem, der ikke nævnes i vejledningen.

Oplysninger om og forklaring af symboler



Med CE-symbolet bekræfter Sonova AG, at dette produkt, inklusive tilbehør, opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger og radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU om radio- og teleterminaludstyr.

Tallene efter CE-symbolet svarer til koden for de certificerede institutioner, der er blevet konsulteret i henhold til ovennævnte direktiver.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren læser og tager hensyn til de relevante oplysninger i denne brugervejledning.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugere er opmærksomme på de relevante advarsler i denne brugervejledning.



Vigtige oplysninger om håndtering og effektiv brug af produktet.



Dette symbol angiver, at de produkter, der beskrives i denne brugervejledning, opfylder kravene til en applikationsdel af typen BF i henhold til EN 60601-1. Høreapparatets overflade er specificeret som en type B anvendt del.



Dette symbol skal være ledsaget af navn og adresse på den bemyndigede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab.



Dette symbol skal være ledsaget af navn og adresse på fabrikanten (der markedsfører denne enhed).

Driftsbetingelser:

Denne enhed er konstrueret på en måde, så den fungerer uden problemer eller begrænsninger, hvis den bruges efter hensigten, medmindre andet er bemærket i disse vejledninger.

Transportforhold:

Temperatur: Nedre grænse = -20 °C

Øvre grænse = +60 °C

Luftfugtighed: Nedre grænse = 0 %, øvre grænse = 75 %

Tryk: Nedre grænse = 50 kPa, øvre grænse = 106 kPa



Symbolet med den overstregede affaldscontainer skal gøre opmærksom på, at denne enhed ikke må smides væk som normalt husholdningsaffald. Bortskaf gamle eller ubrugte enheder på genbrugspladser til elektronisk affald, eller lad din hørespecialist bortskaffe enheden. Korrekt bortskaffelse beskytter miljøet og helbredet.



Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Fremstillingsdato



Serienummer



Begrænsninger for temperaturer ved transport og opbevaring



Begrænsninger for luftfugtighed ved transport og opbevaring



Begrænsninger for atmosfærisk tryk ved transport og opbevaring



Opbevares tørt

Overensstemmelsesoplysninger

Overensstemmelseserklæring

Sonova AG erklærer hermed, at dette produkt opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger samt overholder radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU. Den fulde tekst i overensstemmelseserklæringerne kan rekvireres fra producenten via følgende webadresse:

<https://www.hansaton.de/en/declarations-of-conformity>

Australien/New Zealand:



R-NZ

Viser, at enheden overholder de gældende lovmæssige krav fra Radio Spectrum Management (RSM) og Australian Communications and Media Authority (ACMA) vedrørende lovligt salg i New Zealand og Australien. Etiketten for overholdelse (R-NZ) gælder for radioprodukter, der sælges i New Zealand i henhold til overholdelsesniveau A1.

Det høreapparat, der er beskrevet i denne brugervejledning, er certificeret i henhold til:

Standardhøresystem

USA – FCC-id: Canada IC:

flow+ S312

VMY-UWNB2 2756A-UWNB2

Bemærkning 1

Denne enhed overholder del 15 i FCC reglerne og RSS-210 reglerne i Industry Canada. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- 1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- 2) denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønskede funktioner.

Bemærkning 2

Ændringer eller modifikation af denne enhed, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Sonova AG, kan ophæve FCC-godkendelsen til betjening af denne enhed.

Bemærkning 3

Denne enhed er testet, og den overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler (Federal Communications Commission) og ICES-003-kravene (Interference-Causing Equipment Standard), fremsat af Industry Canada. Disse begrænsninger er udarbejdet for at give en form for beskyttelse mod skadelig interferens i installationer til privat brug. Denne enhed genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og anvendes i henhold til vejledningen, kan den forårsage skadelig interferens af radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der opstår interferens i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens af radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at prøve at korrigere interferensen med en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren
- Slut enheden til en stikkontakt, der er forbundet med et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp

Din tilbagemelding

Registrer dine specifikke behov eller problemer, og tag dem med til dit første tjek, efter du har fået høreapparatet.

Dette hjælper din hørespecialist med at opfylde dine behov.

☐

☐

☐

☐

☐

Yderligere bemærkninger



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Schweiz



Importør af den Europæiske Union
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Tyskland

www.hansaton.com





Distributør

2020-08 029-6398-08 © 2020 Sonova AG. All rights reserved.

