

Vejledning til flow+ ITE-høreapparater (i øret)



Tak

Tak, fordi du har valgt dette høreapparat.

Denne brugervejledning gælder for de følgende modeller:

Lanceringsår: 2020

flow+ 13 Dir W

flow+ 312 Dir W

flow+ 10A Omni

Dine høreapparater

Hørespecialist: _____

Telefonnummer: _____

Model: _____

Serienummer: _____

Udskiftningsbatterier:

☐ Størrelse 10A ☐ Størrelse 312 ☐ Størrelse 13

Garanti: _____

Program 1 er til: _____

Program 2 er til: _____


Program 3 er til: _____

Program 4 er til: _____


Købsdato: _____

Oversigt


Lavt batteri-advarsel

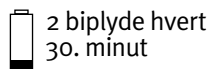


Tænd/Sluk

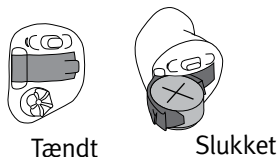


Batteristørrelse

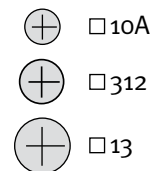

Udskiftning af batterier

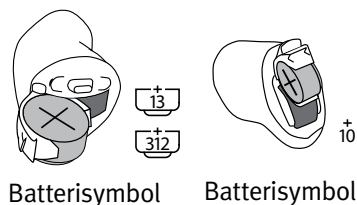


Trykknop

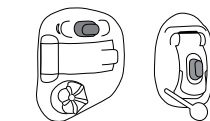

- ☐ programskift
- ☐ lydstyrkekontrol

Drejeknap

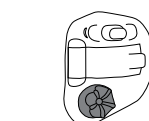

- ☐ lydstyrkekontrol:
fremad=højere,
tilbage=lavere


Indholdsfortegnelse

Overblik over dit høreapparat	2
Advarsler	4
Sådan sætter du dit høreapparat i	10
Sådan tænder/slukker du dit høreapparat	12
Batterioplysninger	13
Tinnitusmasker	16
Betjeningsinstruktioner	19
Sådan bruger du telefonen	26
Sådan beskytter du dit høreapparat	27
Sådan rengøres høreapparatet	28
Ekstra hørehjælpemidler	29
Fejlfindingsvejledning	30
Oplysninger om og forklaring af symboler	34
Overensstemmelsesoplysninger	37
Din tilbagemelding	39
Yderligere bemærkninger	40


Overblik over dit høreapparat

- 1 **Mikrofon** – lyden kommer ind i høreapparatet via mikrofonerne. **Mikrofonbeskyttelse** – beskytter mikrofonen mod snavs og urenheder
- 2 **Trykknop** – skifter mellem høreprogrammer eller ændrer lydstyrken afhængigt af din tilpassede indstilling
- 3 **Batteriskuffe (on & off)** – luk skuffen for at tænde dit høreapparat, åben skuffen helt for at slukke dit høreapparat eller for at skifte batteriet
- 4 **Drejeknap** – kontrollerer lydstyrken
- 5 **Ventilation** – reducerer tilstopningen og forbedrer din egen stemme
- 6 **Udtrækssnor** – gør det nemmere at tage meget små høreapparater ud af øregangen

☐ Retningsbestemt hel skal

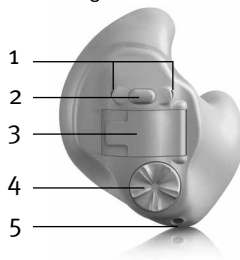

☐ Retningsbestemt halv skal/kanal

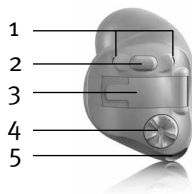

☐ CIC (completely-in-the-canal)



Advarsler

- ⚠ Høreapparaters tilsigtede anvendelse er at forstærke og transmittere lyd til ørerne og herved kompensere for nedsat hørelse. Høreapparatet (programmeret specielt til hvert enkelt høretab) må kun anvendes af den tilsigtede person. Det må ikke anvendes af andre, da det kan skade deres hørelse.
- ⚠ Høreapparatet bør kun anvendes efter din læges eller hørespecialistens anvisninger.
- ⚠ Høreapparatet genskaber ikke en normal hørelse, og det modvirker eller forbedrer ikke en hørenedsættelse, der stammer fra organbetingede omstændigheder.
- ⚠ Du må ikke anvende dit høreapparat i områder med eksplosionsfare.
- ⚠ Allergiske reaktioner i forbindelse med brug af høreapparater er usandsynlige. Men hvis du oplever kløe, rødme, ømhed, inflammation eller en brændende fornemmelse i eller omkring dine ører, bør du informere din hørespecialist og kontakte din læge.

- ⚠ I det usandsynlige tilfælde, at der skulle sidde dele tilbage i øregangen, når høreapparatet er taget ud, skal du straks søge læge.
- ⚠ Fjern høreapparatet ved CT- og MR-scanninger eller andre elektromagnetiske behandlinger.
- ⚠ Du bør være særligt opmærksom på brugen af høreapparat, når det maksimale lydniveau overstiger 132 decibel. Der kan være en risiko for at skade din resterende hørelse. Tal med din hørespecialist for at sikre, at den maksimale lyd i dit høreapparat passer til netop din hørenedsættelse.

Batteriadvarsler

- ⚠ Efterlad aldrig dit høreapparat eller batterier et sted, hvor små børn eller dyr kan nå dem. Tag aldrig høreapparater eller batterier i munden. Hvis et høreapparat eller batteri sluges, skal du straks søge læge.

Forholdsregler

- ① Brugen af høreapparat er kun en del af genetableringen af din hørelse. Lydøvelser og vejledning i mundaflæsning kan også være påkrævet.
- ① I de fleste tilfælde giver uregelmæssig brug af høreapparat ikke fuldt udbytte. Når du har vænnet dig til høreapparatet, bør du bruge det hele dagen hver dag.
- ① Dit høreapparat anvender de mest moderne komponenter for at give den bedst mulige lydkvalitet i alle lydsituationer. Kommunikationsenheder som for eksempel mobiltelefoner kan skabe interferens (en summelyd) i høreapparatet. Hvis du oplever interferens fra en mobiltelefon, der anvendes i nærheden, kan du minimere dette på en række forskellige måder. Skift dit høreapparat til et andet program, drej hovedet i en anden retning, eller find ud af, hvilken mobiltelefon der skaber interferens, og bevæg dig væk fra den.

Mærkning

Serienummeret og produktionsåret er angivet på ydersiden af høreapparatet.

Kompatibilitet med mobiltelefoner

Nogle brugere har oplevet en summende lyd i deres høreapparater, når de bruger mobiltelefon, hvilket kan være tegn på, at mobiltelefonen og høreapparatet ikke er kompatible. Ifølge ANSI C63.19-standarden (ANSI C63.19-2006 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing Aids) kan kompatibiliteten mellem bestemte høreapparater og mobiltelefoner forudsiges, hvis man lægger værdien af høreapparatets immunitet til mobiltelefonens signalværdi. For eksempel ville summen af høreapparatets vurdering på 4 (M₄) og en telefonvurdering på 3 (M₃) resultere i en samlet vurdering på 7. Enhver kombineret vurdering, der svarer til mindst 5, vil give "normal brug." En kombineret vurdering på 6 eller derover vil indikere "fremragende ydeevne."

Dette høreapparats immunitet er mindst M₄/T₄* Udstyrets ydelsesmålinger, kategorier og systemklassificeringer er baseret på de bedste oplysninger, der er til rådighed, men kan ikke garantere, at alle brugere vil være tilfredse.

* For modeller med telespoleindgang




- ① Bemærk: Det individuelle høreapparats ydeevne kan variere afhængigt af de enkelte mobiltelefoner. Derfor bør du afprøve dette høreapparat sammen med din mobiltelefon og ligeledes sørge for at afprøve det, før du køber en ny mobiltelefon.

Sådan sætter du dit høreapparat i

Dit høreapparat kan være farvekodet, enten på batterilågen og/eller på høreapparatets mærkat: rød = højre øre; blå = venstre øre.

Sådan indsætter du dit høreapparat


1. Hold høreapparatet mellem tommel- og pegefinger med batterilågen pegende væk fra øret.
2. Hvis dit høreapparat har en udtrækssnor, skal du sætte det i med udtrækssnoren nedad.
3. Sæt forsigtigt øregangsdelen af høreapparatet ind i øret, og brug pegefingern til at skubbe høreapparatet helt på plads. Det skal passe helt nøjagtigt og komfortabelt. Træk forsigtigt øreflippen nedefter og bagud for gøre det nemmere at sætte høreapparatet i øregangen.

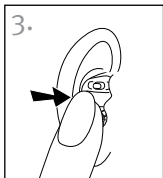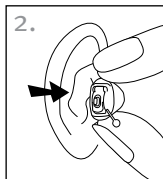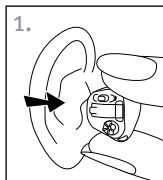

Sådan fjerner du dit høreapparat

1. Hvis du vil fjerne høreapparatet, skal du tage fat i det med tommel- og pegefinger. Hvis dit høreapparat har en udtrækssnor, skal du trække forsigtigt i den for at fjerne høreapparatet.
2. Bevæg kæben op og ned, eller tryk bag øret for at løsne høreapparatet.



❶ Bemærk: Du må ikke anvende kontrollerne eller batteriskuffen til at fjerne dit høreapparat.

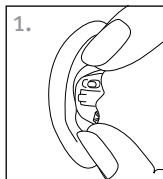

Sådan tænder/slukker du dit høreapparat

Batteriskuffen fungerer som en tænd- og slukknep.

1. **Tændt:** Luk batteriskuffen helt.
- ① Bemærk: Når du tænder høreapparatet, kan der være lidt forsinkelse på trykknappfunktionen, før den aktiveres. Dette er for at forhindre utilsigtet aktivering under isætning.
2. **Slukket:** Luk batteriskuffen helt op for at slukke for høreapparatet og skifte batteri.

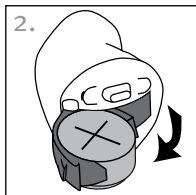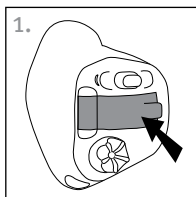

Batterioplysninger


Lavt batteri-advarsel

To lange biplyde indikerer, at batteriniveauet på høreapparatet er lavt. Når advarslen for lavt batteriniveau har lydt, kan lyden blive mindre klar. Dette er normalt og kan afhjælpes ved at skifte batterier.

Hvis ikke du kan høre den lave batteriadvarel, kan din hørespecialist ændre tonehøjden eller lydstyrken. Du kan også vælge at få fjernet advarslen helt.

- ① Dit høreapparat er designet til at generere en advarsel om lavt batteriniveau hvert 30. minut, indtil batterierne udskiftes, men afhængigt af batteriernes tilstand kan de løbe tør, inden der udsendes en ny advarsel. Det anbefales derfor, at batterierne udskiftes så hurtigt som muligt efter den første advarsel.

Sådan udskiftes batteriet

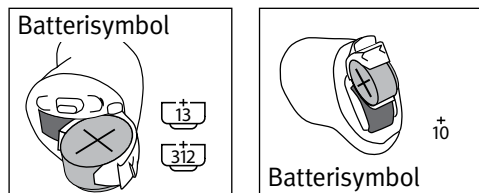

1. Åben forsigtigt batteriskuffen med en fingernegl.
 2. Tag fat i batteriet med tommel- og pegefinger, og fjern det.
 3. Indsæt det nye batteri i batteriskuffen, så plustegnet (+) på batteriet peger samme vej som batteriindikatoren på batteriskuffen. Dette sikrer, at batteriskuffen lukkes korrekt.
- ① Bemærk: Hvis batteriet er indsat forkert, kan høreapparatet ikke tændes.
4. Luk batteriskuffen.

Pleje af batterier

- Bortskaf altid batterierne på en sikker og miljøvenlig måde.
- For at forlænge batteriets levetid skal du huske at slukke for dit høreapparat, når det ikke er i brug, specielt når du sover.
- Tag batterierne ud, og lad batteriskuffen være åben, når høreapparatet ikke bruges, specielt når du sover. Herved fordamper den indvendige fugt.

Tinnitusmasker

Tinnitusmasker benytter bredbåndss lyd til at give midlertidig tinnitus-lindring.

Tinnitusmasker – advarsler

- ⚠ Tinnitusmaskeren er en bredbåndss lydgenerator. Den er et middel til lydberigelsesterapi og bruges som en del af et individuelt tilpasset tinnitusprogram til at yde midlertidig lindring for tinnitus.
- ⚠ Det underliggende princip ved lydberigelse er at producere en anden (lydstimulering) for at afhjælpe klientens fokus på sin tinnitus og derved undgå de ubehagelige reaktioner. Lydberigelse sammen med instruerende vejledning er en etableret metode til behandling af tinnitus.
- ⚠ Luftledende høreapparater til brug sammen med tinnitusmasker skal tilpasses af en hørespecialist, der har kendskab til diagnose og behandling af tinnitus.

- ⚠ Skulle du få bivirkninger ved brug af tinnitusmaskeren, såsom hovedpine, kvalme, svimmelhed eller hjertebanken, eller opleve en formindsket auditiv funktion, såsom formindsket tolerance over for høje lyde, forværring af tinnitus eller uklar tale, bør du ikke fortsætte med brug af apparatet, og du bør kontakte din læge.
- ⚠ Lydstyrken for tinnitusmaskeren kan indstilles til et niveau, der kan forårsage permanent høreskade ved længerevarende brug. Hvis tinnitusmaskeren er indstillet til et sådant niveau i høreapparatet, vil din hørespecialist rådgive dig om, hvor længe du må bruge tinnitusmaskeren dagligt. Tinnitusmaskeren bør aldrig anvendes, hvis lydstyrken opleves ubehagelig.


Vigtige oplysninger

- ① Tinnitusmaskeren genererer lyde, som anvendes som del af dit individuelt tilpassede midlertidige tinnitus-administrationsprogram til at yde lindring for tinnitus. Det bør altid anvendes som foreskrevet af en hørespecialist, der er bekendt med diagnose og behandling af tinnitus.
- ① For at tage godt vare på sit helbred er det vigtigt for personer med tinnitus at få en ørelæges faglige vurdering, inden en lydgenerator anvendes. Formålet med en sådan vurdering er at sikre, at tinnitusfremkaldende sygdomme, der kan behandles medicinsk, påvises og behandles, før der iværksættes brug af en lydgenerator.
- ① Tinnitusmaskeren er beregnet til personer på 18 år eller derover, som oplever både hørenedsættelse og tinnitus.

Betjeningsinstruktioner

Dit høreapparat kan leveres med to kontroller, som gør det muligt at justere det yderligere – en drejeknap og en trykknop.

Drejeknap

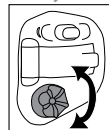

Drejeknappen på dit høreapparat kan konfigureres som lydstyrkekontrol.

☐ Lydstyrkekontrol


Hvis drejeknappen er konfigureret som en lydstyrkekontrol:

- Drej langsomt drejeknappen fremad mod din næse for at øge lydstyrken
- Drej langsomt drejeknappen væk fra din næse for at reducere lydstyrken

Høreapparatet bipper, når du ændrer lydniveauet.

Lydstyrkeindstilling	Biplyde	
Anbefalet lydniveau	♪	1 biplyd
Skruer op for lydstyrken	♪	kort bip
Skruer ned for lydstyrken	♪	kort bip
Maksimalt lydniveau	♪♪	2 biplyde
Minimum lydniveau	♪♪	2 biplyde

Trykknop

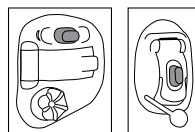

Trykknappen på høreapparatet kan enten være en programkontrol, en lydstyrkekontrol eller en kombination af disse.

□ Programkontrol

Hvis trykknappen er konfigureret som programkontrol, skifter du til et nyt høreprogram, hver gang du trykker på knappen. Dit høreapparat bipper for at indikere, hvilket program du anvender.

Programindstilling	Biplyde	
Program 1 (f.eks. AutoMic)	♪	1 biplyd
Program 2 (f.eks. tale i støj)	♪♪	2 biplyde
Program 3 (f.eks. telefon)	♪♪♪	3 biplyde
Program 4 (f.eks. musik)	♪♪♪♪	4 biplyde
Trådløs synkronisering (hvis aktiveret)	Det modsatte øre bipper det samme som den side, der justeres	

Se listen over programmer forrest i denne brochure.

□ Lydstyrkekontrol

Hvis trykknappen er konfigureret som lydstyrkekontrol:

- Tryk på knappen på høreapparatet i højre side for at øge lydstyrken
- Tryk på knappen på høreapparatet i venstre side for at mindske lydstyrken

eller:

- Tryk på knappen for at gå igennem dine lydniveauer

Høreapparatet bipper, når du ændrer lydniveauet.

Lydstyrkeindstilling	Biplyde
Anbefalet lydniveau	 1 biplyd
Skruer op for lydstyrken	 kort bip
Skruer ned for lydstyrken	 kort bip
Maksimalt lydniveau	 2 biplyde
Minimum lydniveau	 2 biplyde

□ Trykknop til program-/lydstyrkekontrol

Hvis din hørespecialist har konfigureret det ene høreapparat til at være en programkontrol og det andet høreapparat til at være en lydstyrkekontrol:

- Tryk på knappen på høreapparatet i ☐ højre/☐ venstre side for at tilgå dine forskellige programmer, og
- Tryk på knappen på høreapparatet i ☐ højre/☐ venstre side for at vælge lydniveau

Tinnitusmasker

Hvis din hørespecialist både har konfigureret et tinnitusmasker-program og en lydstyrkekontrol, kan du justere tinnitusmasker-niveauet, mens du befinder dig i tinnitusmasker-programmet. For at tilpasse støjniveauet skal du gøre et af følgende:

- Drejeknap
 - Drej langsomt drejeknappen fremad mod din næse for at øge tinnitusmaskeren
 - Drej langsomt drejeknappen væk fra din næse for at reducere tinnitusmaskeren
- Trykknapp (højre/venstre)
 - Tryk på knappen på høreapparatet i højre side for at øge tinnitusmaskeren
 - Tryk på knappen på høreapparatet i venstre side for at mindske tinnitusmaskeren
- Trykknapp (trin)
 - Tryk på knappen for at gå igennem de forskellige lydniveauer for tinnitusmasker

Høreapparatet bipper, når du ændrer niveauet.

Trådløs synkronisering

Hvis trådløs synkronisering er aktiveret, ændres lydstyrken eller programindstillingerne i begge høreapparater samtidig. Trådløs synkronisering fungerer med trykknappen og drejeknappen.

Hvis trykknappen f.eks. er konfigureret som programkontrol, og trådløs synkronisering er aktiveret, ændres programmet i begge høreapparater, når du trykker på knappen på det ene høreapparat.

Sådan bruger du telefonen

Din hørespecialist har muligvis konfigureret et telefonprogram på dit høreapparat, som du kan få adgang til ved at bruge trykknappen.

Sådan beskytter du dit høreapparat

- Åben batterilskuffen, når apparatet ikke er i brug.
- Fjern altid dit høreapparat, når du anvender hårprodukter. Høreapparatet kan blive tilstoppet og ophøre med at fungere ordentligt.
- Du må ikke have høreapparatet på i bad eller sænke det ned i vand.
- Hvis dit høreapparat bliver vådt, må du ikke forsøge at tørre det i ovnen eller mikroovnen. Rør ikke ved nogen af kontrollerne. Åben straks batterilskuffen, og lad høreapparatet tørre af sig selv i 24 timer.
- Beskyt dit høreapparat mod ekstrem varme (hårtørrer, bilens handskerum eller instrumentbræt).
- Regelmæssig brug af en fugtfjerner, f.eks. et Dri-Aid-kit, kan hjælpe med at forebygge korrosion og forlænge høreapparatets levetid.
- Undgå at tabe høreapparatet og at slå det mod hårde overflader.

Sådan rengøres høreapparatet

Brug en blød klud til at rengøre dit høreapparat hver aften, og læg det i æsken med batteriskuffen åbnet, så fugten kan fordampe.

- ① Ørevoks er naturligt og almindeligt. Det er vigtigt, at du dagligt sørger for, at dit høreapparat er frit for ørevoks.
- ① Fjern ørevoksen fra dit høreapparat hver dag ved hjælp af den medfølgende børste.
- ① Du må ikke anvende sprit til at rengøre dit høreapparat.
- ① Du må ikke anvende skarpe genstande til at løsne ørevoksen. Du kan beskadige høreapparatet, hvis du stikker husholdningsartikler ind i det.
- ① Tal med din hørespecialist om at arrangere regelmæssige aftaler for at få fjernet ørevoksen fra høreapparatet.

Ekstra hørehjælpemidler

Høre på offentlige steder

Telespoler opfanger elektromagnetisk energi og omdanner den til lyd. Høreapparatets telespole kan hjælpe dig med at høre på offentlige steder, der er udstyret med et teleslyngesystem. Dette symbol  betyder, at der er et teleslyngesystem på stedet, der kan være kompatibelt med dit høreapparat. Kontakt din hørespecialist for at få flere oplysninger om teleslyngesystemer.

Fejlfindingsvejledning

Årsag	Mulig løsning
Ingen lyd	
Ikke tændt	Tænd
Lavt batteriniveau/dødt batteri	Udskift batteriet
Dårlig batterikontakt	Henvend dig til din hørespecialist
Batteriet er sat i omvendt	Isæt batteriet med plussiden (+) opad
Høreapparatet er blokeret af ørevoks	Se "Rengøring af dit høreapparat". Henvend dig til din hørespecialist

Årsag	Mulig løsning
Ikke højt nok	
Lav lydstyrke	Skru op for lyden. Kontakt din hørespecialist, hvis din model ikke har en manuel lydstyrkekontrol, eller hvis problemet fortsætter
Lavt batteriniveau	Udskift batteriet
Høreapparatet er ikke indsat korrekt	Se "Sådan sætter du dit høreapparat i øret". Fjern, og indsæt det igen forsigtigt
Hørelsen ændret	Henvend dig til din hørespecialist
Høreapparatet er blokeret af ørevoks	Se "Rengøring af dit høreapparat". Henvend dig til din hørespecialist

Årsag	Mulig løsning
Intermitterende lyde	
Lavt batteriniveau	Udskift batteriet
Tilsmudset batterikontakt	Henvend dig til din hørespecialist
To lange biplyde	
Lavt batteriniveau	Udskift batteriet
Hyletone	
Høreapparatet er ikke indsat korrekt	Se "Sådan sætter du dit høreapparat i øret". Fjern, og indsæt det igen forsigtigt
Hånd/tøj tæt på øret	Flyt hånden/tøjet væk fra øret
Høreapparatet sidder forkert	Henvend dig til din hørespecialist

Årsag	Mulig løsning
Ikke klar, forvrænget	
Høreapparatet sidder forkert	Henvend dig til din hørespecialist
Høreapparatet er blokeret af ørevoks	Se "Rengøring af dit høreapparat". Henvend dig til din hørespecialist
Lavt batteriniveau	Udskift batteriet
Svag lyd i telefonen	
Lav lydstyrke	Skrup op for lyden
Telefonen er ikke placeret ordentligt	Bevæg telefonen rundt om øret for at få et tydeligere signal. Se "Sådan anvender du telefonen"
Høreapparatet skal justeres	Henvend dig til din hørespecialist

Kontakt din hørespecialist, hvis du har et problem, der ikke nævnes i vejledningen.

Oplysninger om og forklaring af symboler



Med CE-symbolet bekræfter Sonova AG, at dette produkt, inklusive tilbehør, opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger og radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU om radio- og teleterminaludstyr.

Tallene efter CE-symbolet svarer til koden for de certificerede institutioner, der er blevet konsulteret i henhold til ovennævnte direktiver.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren læser og tager hensyn til de relevante oplysninger i denne brugervejledning.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugere er opmærksomme på de relevante advarsler i denne brugervejledning.



Vigtige oplysninger om håndtering og effektiv brug af produktet.



Dette symbol angiver, at de produkter, der beskrives i denne brugervejledning, opfylder kravene til en applikationsdel af typen BF i henhold til EN 60601-1. Høreapparatets overflade er specificeret som en type B anvendt del.



Dette symbol skal være ledsaget af navn og adresse på den bemyndigede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab.



Dette symbol skal være ledsaget af navn og adresse på fabrikanten (der markedsfører denne enhed).

Driftsbetingelser:

Denne enhed er konstrueret på en måde, så den fungerer uden problemer eller begrænsninger, hvis den bruges efter hensigten, medmindre andet er bemærket i disse vejledninger.

Transportforhold:

Temperatur: Nedre grænse = -20 °C

Øvre grænse = +60 °C

Luftfugtighed: Nedre grænse = 0 %, øvre grænse = 75 %

Tryk: Nedre grænse = 50 kPa, øvre grænse = 106 kPa



Symbolet med den overstregede affaldscontainer skal gøre opmærksom på, at denne enhed ikke må smides væk som normalt husholdningsaffald. Bortskaf gamle eller ubrugte enheder på genbrugspladser til elektronisk affald, eller lad din hørespecialist bortskaffe enheden. Korrekt bortskaffelse beskytter miljøet og helbredet.



Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Fremstillingsdato



Serienummer



Begrænsninger for temperaturer ved transport og opbevaring



Begrænsninger for luftfugtighed ved transport og opbevaring



Begrænsninger for atmosfærisk tryk ved transport og opbevaring



Opbevares tørt

Overensstemmelsesoplysninger

Overensstemmelseserklæring

Sonova AG erklærer hermed, at dette produkt opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger samt overholder radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU. Den fulde tekst i overensstemmelseserklæringerne kan rekvireres fra producenten via følgende webadresse:

<https://www.hansaton.de/en/declarations-of-conformity>

Australien/New Zealand:



Viser, at enheden overholder de gældende lovmæssige krav fra Radio Spectrum Management (RSM) og Australian Communications and Media Authority (ACMA) vedrørende lovligt salg i New Zealand og Australien. Etiketten for overholdelse (R-NZ) gælder for radioprodukter, der sælges i New Zealand i henhold til overholdelsesniveau A1.

R-NZ

Det høreapparat, der er beskrevet i denne brugervejledning, er certificeret i henhold til:

Standardhøresystem

	USA – FCC-id:	Canada IC:
flow+ ITE 13, 312	VMY-UWITE2	2756A-UWITE2
flow+ ITE 10A omni	VMY-UWITE4	2756A-UWITE4

Bemærkning 1

Denne enhed overholder del 15 i FCC reglerne og RSS-210 reglerne i Industry Canada. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- 1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- 2) denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønskede funktioner.

Bemærkning 2

Ændringer eller modifikation af denne enhed, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Sonova AG, kan ophæve FCC-godkendelsen til betjening af denne enhed.

Bemærkning 3

Denne enhed er testet, og den overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler (Federal Communications Commission) og ICES-003-kravene (Interference-Causing Equipment Standard), fremsat af Industry Canada. Disse begrænsninger er udarbejdet for at give en form for beskyttelse mod skadelig interferens i installationer til privat brug. Denne enhed genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og anvendes i henhold til vejledningen, kan den forårsage skadelig interferens af radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der opstår interferens i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens af radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at prøve at korrigere interferensen med en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren
- Slut enheden til en stikkontakt, der er forbundet med et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp

Din tilbagemelding

Registrer dine specifikke behov eller problemer, og tag dem med til dit første tjek, efter du har fået høreapparatet.

Dette hjælper din hørespecialist med at opfylde dine behov.

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

Yderligere bemærkninger



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Schweiz



Importør af den Europæiske Union
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Tyskland

www.hansaton.com





Distributør

A/2020-08 029-6399-08 © 2020 Sonova AG. All rights reserved.

