

سماعة wave من HANSATON

ساعد عملاءك على
الاستمتاع بروعة الحياة

يمكن لعملائك الاستمتاع بمزايا
الاتصال بهواتفهم المحمولة إلى
جانب الأصوات التي يحبونها.



HANSATON
hearing & emotions

تلبية احتياجات عملائك

يعزز المحادثات ويمنع الضوضاء

تقنية HearIntelligence™ تدعم التقنية السمع لدى عملائك من خلال معالجة الأصوات الواردة وتقليلها إلى مكونات أساسية يتم تعزيزها أو كبتها، مما يوفر تجربة سمعية محسنة.

التصميم يتوافق مع الأداء

تجمع HANSATON بين الأداء العالي والتصميم الأنيق في كل من موديلات سماعة وبيف من HANSATON يمكنك الاختيار من بين تصميم المُستقبل داخل القناة (RIC) الذي يتميز بالأناقة العالية جداً أو السماعة خلف الأذن (BTE) التي تُعرف بموثوقيتها العالية. يمكن أن تُشعر التصميمات الأنيقة زبائنك بالراحة عند تجربة المعينات السمعية.

تحسين الصوت

بالاستعانة بسير عمل FocussedFit، يمكنك مساعدة زبائنك في السماع بشكل أفضل وأسرع. تبدأ معالجة التأقلم الصوتي معهم بمستوى مريح وتوفر طريقة للوصول إلى الإعداد الأمثل بمرور الوقت حتى يعتادوا على تضخيم الصوت. يمثل AutomaticMic حلاً سهلاً يغير الاتجاه تلقائياً بناءً على مستوى الضجيج بحيث يمكن لزبائنك الاستمتاع بسماعاتهم تلقائياً.

شجّع عملاءك على سماع
اللحظات المهمة في حياتهم.



مميزات اتصال لاسلكي

خيارات اتصال سهلة لمشاركة المحتوى مع عملاءك:

الاتصال بجميع الهواتف المحمولة

حوّل أجهزة السمع الخاصة بهم إلى سماعات رأس لاسلكية منفصلة. مكن عملاءك من الرد على مكالمات هاتفية أو الاستماع إلى الموسيقى التي تُبث مباشرةً إلى معيّناتهم السمعية وتوصيل هاتفيّن أو جهازين لوهيين في وقت واحد.*




تجربة سمعية مخصّصة

يمكن لعملائك تحديد اختيارات التخصيص المناسبة لهم في التو واللحظة باستخدام تطبيق الهاتف الذكي الخاص بنا، والذي يحتوي على توازن جيد بين التعديلات السريعة وذات المغزى وخيارات الضبط الأكثر تقدماً.



وصلة TV Connector

يمكن للزبائن مشاهدة أفلامهم المفضلة أو برامجهم التلفزيونية المحببة أو مواكبة مستجدات الأخبار. يرسل TV Connector الصوت من التلفزيون أو أجهزة الصوت الأخرى إلى سماعاتهم مباشرةً.

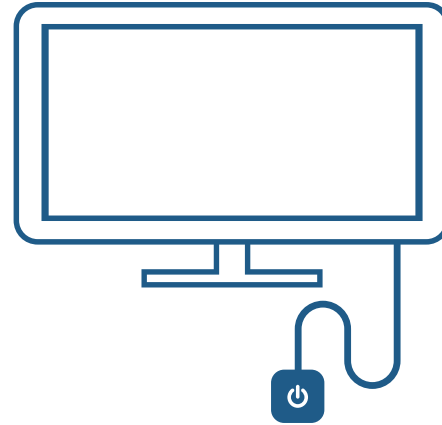

*الهواتف الذكية والهواتف المحمولة التقليدية المتوافقة مع ملفات تعريف Bluetooth®. علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.



يتميز هذا المنتج بتصميم غاية في الأناقة للوفاء باحتياجات زبائنك المتنوعة



توفر سماعة wave من HANSATON سماعة واحدة من نوع المُستقبل داخل القناة (RIC) و 3 سماعات من نوع خلف الأذن (BTE). يتيح لك هذا إمكانية تلبية متطلبات مجموعة واسعة من أنواع فقدان السمع، من المستوى الخفيف إلى الشديد، للوفاء باحتياجات المزيد من العملاء.

تغطي سماعة wave من HANSATON مجموعة واسعة من أنواع فقدان السمع وتتميز بتقنية ذات فاعلية مؤكدة وبتصميمات ذات مظهر رائع بما يفي باحتياجات عملائك.

مقاومة للماء والأتربة


تتميز هذه السماعات، التي تشتمل على غشاء عازل بلازمي خاص، بمظهر أنيق وبأنها مقاومة للأتربة والماء وفقاً لتصنيف IP68 الصارم.



سماعة wave M 312 من نوع خلف الأذن (BTE) من HANSATON

يختص نظام سماعات wave M 312 من HANSATON بحالات فقدان السمع من الخفيفة إلى الحادة.

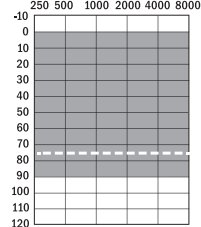


مُستقبل M	
63 / 128	خطاف (ناقل) صوت الخرج/الكسب (2cc)
58 / 122	الأنبوب الرفيع للخرج/الكسب (2cc)
نطاقات البرمجة	
	
--- الأنبوب الرفيع	

سماعة wave R 312 من نوع المُستقبل داخل القناة (RIC) من HANSATON

يختص نظام سماعات wave R 312 من HANSATON بحالات فقدان السمع من الخفيفة إلى الشديدة.

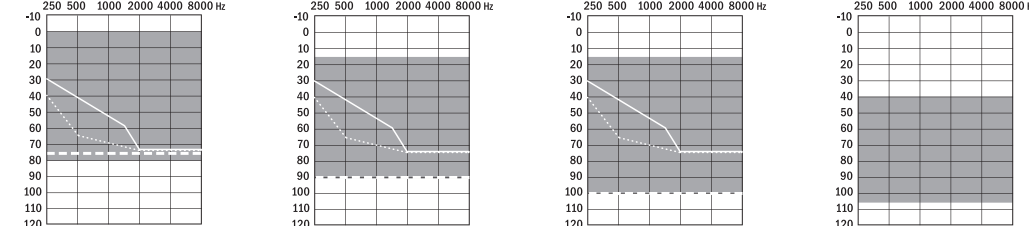

مُستقبل UP	مُستقبل P	مُستقبل M	مُستقبل S	
71 / 132	59 / 122	51 / 114	47 / 111	المخرج/التكبير (2cc)
نطاقات البرمجة				
				
— القبة المفتوحة/القبة المغطاة القبة المصمتة --- قبة الطاقة/SlimTip				

سماعة wave UP 675 من نوع خلف الأذن من HANSATON

يختص نظام نظام سماعات wave UP 675 من HANSATON بحالات فقدان السمع من المتوسطة إلى الشديدة.



مُستقبل UP	
78 / 134	خطاف (ناقل) الصوت المفلتر للخرج/الكسب (2cc)
84 / 141	خطاف (ناقل) الصوت غير المفلتر للخرج/الكسب (2cc)
نطاقات البرمجة	

سماعة wave SP 13 من نوع خلف الأذن من HANSATON

يختص نظام سماعات wave SP 13 من HANSATON بحالات فقدان السمع من الخفيفة إلى الحادة.



مُستقبل SP	
75 / 133	خطاف (ناقل) الصوت المفلتر للخرج/الكسب (2cc)
81 / 139	خطاف (ناقل) الصوت غير المفلتر للخرج/الكسب (2cc)
نطاقات البرمجة	



HEAR Intelligence™

طوّرت HANSATON تقنية HearIntelligence™ لدعم حاسة السمع الطبيعية عن طريق تحسين الوظائف والعمليات الطبيعية في حاسة السمع البشرية.

الاتصال اللاسلكي

- مصنوعة لتناسب كل الهواتف
- مكالمات هاتفية بدون استخدام اليدين عبر تقنية Bluetooth®
- بث الوسائط عبر تقنية Bluetooth
 - SpeechStream •
 - MusicStream •
- إقران ما يصل إلى 8 أجهزة عبر تقنية Bluetooth
- توصيل ما يصل إلى جهازين عبر تقنية Bluetooth في وقت واحد
- الملحقات الاختيارية:
 - TV Connector •
 - PartnerMic •
 - جهاز Remote Control •
- متوافق مع تطبيق البث عن بُعد
- BiLink
- مؤشر فقدان اتصال التسجيل الثنائي الأذن

التركيز على الكلام

- ميكروفون تلقائي*
- ConversationLift
- نقل الترددات العالية لاستعادة الصوت

الراحة في الضجيج

- NoiseReduction
- معالجة الأصوات المرتفعة المفاجئة
- معالجة الصفير

عمليات الضبط المخصصة

- 12 قناة
- FocussedFit
- التأقلم الذكي
- تسجيل البيانات
- ما يصل إلى 4 برامج يدوية التحكم





HANSATON هي العلامة التجارية الحصرية لك ولعملائك منذ عام 1957.
نصب كل تركيزنا على علاقاتك الشخصية ونجاحك.
يتيح لنا تراثنا الألماني، إلى جانب قوة الابتكار لدى Sonova، تقديم منتجات
تتميز بجمال التصميم، استنادًا إلى أحدث التقنيات التي ثبتت كفاءتها.



نحن نفود الانتقال إلى مستقبل تتسم فيه عملياتنا
بالكفاءة في استخدام الموارد وانخفاض انبعاثات
الكربون طوال دورة حياة منتجاتنا وخدماتنا.

sonova.com/sustainability



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH 8712 Stäfa · سويسرا



sonova
HEAR THE WORLD