

Hansaton Essenz

Erleben Sie die Essenz
des Lebens.



 **HANSATON**

Hören Sie die Klänge,
die Ihnen die kostbarsten
Momenten des Lebens
nahebringen!



Erleben Sie die Essenz des Lebens

Hansaton Essenz vereint modernste Technologie mit intuitiven Funktionen, damit Ihre Kunden der Essenz des Lebens lauschen und die bedeutungsvollen Klänge wahrnehmen können, die unsere Welt so wunderbar und besonders machen.

Das Herzstück von Hansaton Essenz bilden drei zentrale Elemente:

- Neuer ERA™ Chip mit universeller Konnektivität
- HearIntelligence 6.0 Technologie
- Hansaton Essenz Klangverarbeitung mit KI-gestütztem Automatikprogramm

Alles in einem ansprechend aussehendem Hörsystem untergebracht, das für zusätzlichen Komfort mit einer neu gestalteten Ladestation daherkommt. Rüsten Sie Ihre Kunden mit auf Langlebigkeit und unkomplizierte Pflege ausgelegten Hörsystemen für viele neue Erlebnisse aus.

Wir freuen uns, Ihnen Hansaton Essenz anzubieten. So können noch mehr Menschen den Genuss des Hörens erleben.




sound E-R in Originalgröße

Kleiner Chip, der große Erlebnisse ermöglicht

Unser neuer, ultra-schnell reagierender, ERA Chip setzt völlig neue Maßstäbe für die Konnektivität und wartet mit den folgenden Merkmalen auf:

- **Branchenführende universelle Konnektivität** für sofortige Kompatibilität mit allen Bluetooth®-fähigen Geräten.¹ Kopplung von bis zu 8 Geräten und dauerhafte Verbindung mit bis zu 2 Mobiltelefonen oder Tablets gleichzeitig.
- **Stabiles freihändiges Telefonieren und Streamen** mit einer bis zu 6 Mal höheren kabellosen Übertragungsleistung für zuverlässigere Bluetooth-Verbindungen.
- **Größere Verbindungsreichweite** – so noch nie da gewesene Bewegungsfreiheit mit im Optimalfall doppelt so hoher Reichweite dank ERA Chip.
- **Höchste Reaktionsschnelligkeit** für einen nahtlosen Wechsel vom Lieblingslied zum Lieblingsmenschen dank mehr als 550 Millionen Rechenoperationen pro Sekunde und 74 % mehr RAM für eine schnellere Verarbeitung.

Begeistern Sie Ihre Kunden mit einer beeindruckend stabilen und hochgradig reaktionsschnellen Konnektivität, die Reichweiten größer als ein Fußballfeld ermöglicht.²

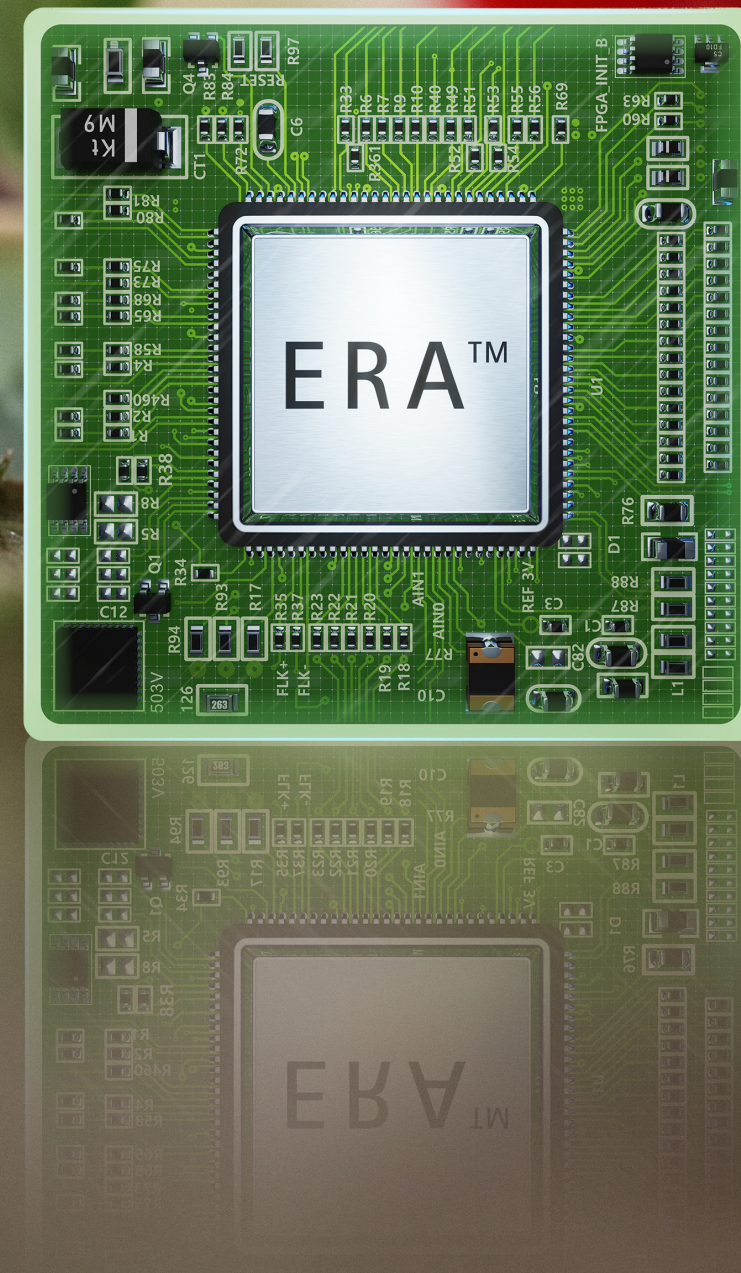

¹ Smartphones und traditionelle Mobiltelefone mit kompatiblen Bluetooth-Profilen

² Hindernisfreier Signalweg; je nach Mobiltelefon abweichend
Sämtliche Vergleiche beziehen sich auf eine Gegenüberstellung mit den Vorgängerprodukten von Hansaton.
Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Hear**Intelligence** 6.0

with Hansaton Essenz sound processing

Sprache ist das Herzstück jeder Unterhaltung.

Mit HearIntelligence 6.0 genießen Ihre Kunden die Möglichkeit, aktiv an den bedeutungsvollen Momenten des Lebens teilzuhaben.

Ihre Kunden profitieren von den fortschrittlichen Funktionen von **HearIntelligence 6.0 mit der Klangverarbeitung von Hansaton Essenz**, die durch den innovativen **ERA Chip** unterstützt wird. Diese modernen Hörsysteme bieten von Beginn an eine herausragende Klangleistung.

Wesentliche Merkmale:

- **Erwecken Sie Gespräche in geräuschvollen Umgebungen zum Leben** – mit StereoBeam, jetzt mit **Intelligent NoiseReduction** und Direktionalem SpeechBoost.
- Stellen Sie mit **Soft SpeechBoost** sicher, dass **leise Stimmen gehört werden**. Damit wird die Höranstrengung reduziert, die Ermüdung minimiert und das Sprachverstehen bei entfernten und leisen Sprecherinnen und Sprechern verbessert.¹
- Das **KI-trainierte** Automatikprogramm **Intelligent AutoSurround** gewährleistet eine schnelle und genaue Überwachung des Umfelds und passt die Einstellungen optimal an jede Hörsituation an.
- Die **universelle Konnektivität** ermöglicht freihändiges Telefonieren sowie schnelles und zuverlässiges Streaming ohne Unterbrechungen. Auch können Ihre Kunden damit nahtlos von ihrem Lieblingslied auf ihren Lieblingsmenschen umschalten.
- Mit der Funktion **Mein Hörsystem finden** können Kunden ihre Hörsysteme ganz einfach orten, was für mehr Sicherheit und einen höheren Komfort sorgt.



Intelligent AutoSurround

KI-gestütztes Automatikprogramm, das die akustische Umgebung erkennt und sich optimal daran anpasst



Fokussierung auf Sprache

Sprachanhebung mit Fokussierung auf die sprechende Person



Lokalisierung akustischer Signale

Lokalisierung wichtiger Geräuschquellen in ruhigen und geräuschvollen Hörumgebungen



Hörkomfort in geräuschvoller Umgebung

Unterdrückung von Störgeräuschen für mehr Komfort in allen Situationen



Personalisierte Anpassungen

Anwenderfreundliche App und Anpasssoftware für eine optimale Klangverarbeitung



Kabellose Konnektivität

Schnelle und intuitive Anbindungsmöglichkeiten mit intelligenten Multimedia-Lösungen

¹ Hansaton Research Insights: Better Hearing in Quiet (2025).



Erwecken Sie Gespräche zum Leben – selbst in geräuschvollen Umgebungen

Eine lebendige Stadt mit all ihren wunderbaren Klängen zu erkunden, ist für viele ein schönes Abenteuer. Dagegen kann die gleiche Stadt für jemanden mit Hörverlust überwältigend und strapaziös sein. Hansaton Essenz kann Ihre Kunden in derart anspruchsvollen Situationen unterstützen – und das völlig automatisch.

Sobald das KI-trainierte Automatikprogramm **Intelligent AutoSurround** ein lebendiges Umfeld erkennt, kann es verschiedene Funktionen zuschalten, mit denen Ihre Kunden Gesprächen auch weiter folgen können, anstatt überwältigt zu werden.

Für Unterhaltungen in einer großen Gruppe oder anderen geräuschvollen Umgebungen:

- Der **Frequenzgang** ist optimiert, um Rauschen zu reduzieren
- Intensivere Sprachanhebung mit **SpeechBoost** und Störgeräuschunterdrückung mit **NoiseReduction**
- Zuschaltung von **Dynamic SpeechBeam** zur Fokussierung auf Sprache, egal aus welcher Richtung sie kommt
- Lokalisierung der Sprachquellen mit **SphereSound Natural**
- Dynamische Sprachanhebung mit **Direktionalem SpeechBoost**
- Unterdrückung von seitlich und von hinten kommenden Störgeräuschen mit **Intelligent NoiseReduction**

In noch geräuschvolleren Umgebungen schaltet sich **StereoBeam** zu, um einen engen Richtfokus zu erzeugen, der sich auf Sprache von vorne konzentriert, was ein ganzheitlich optimiertes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) gewährleistet.

Alle diese Anpassungen werden automatisch vorgenommen, damit sich Ihre Kunden auf das Wesen der Unterhaltung konzentrieren können.

Sämtliche Vergleiche beziehen sich auf eine Gegenüberstellung mit den Vorgängerprodukten von Hansaton.





Damit auch leise Stimmen gehört werden

Sprache ist das Herzstück jeder Unterhaltung. Aus diesem Grund legt Hansaton Essenz ganz besonderen Wert auf Klangverarbeitungsfunktionen, die Sprache in vielen verschiedenen Situationen fördern.

Stellen Sie sich zwei Freundinnen vor, die bei einem gemütlichen Spaziergang Geheimnisse austauschen, untermalt von dem Rascheln des Grases unter ihren Füßen und dem Ruf der Seemöwen am Himmel. Dank **Soft SpeechBoost** können auch leise Sprecherinnen und Sprecher mit weniger Anstrengung verstanden werden.¹

Nachstehend finden Sie die vielen verschiedenen Vorzüge von Soft SpeechBoost:^{1 2}

- **Höranstrengung** reduziert sich bei leiser oder entfernter Sprache um bis zu **39 %** und bei Sprache aus einem Nebenraum um bis zu **45 %**.
- Soft SpeechBoost hebt leise und entfernte Sprache an, was sich zum Tagesende hin durch eine um bis zu **21 % geringere Ermüdung** bemerkbar macht.
- **Sprachverstehen** verbessert sich bei entfernter Sprache um bis zu **23 %** und bei Sprache aus einem Nebenraum um bis zu **18 %**.

Sorgen Sie mit **Soft SpeechBoost** dafür, dass auch die leisen Sprecherinnen und Sprecher wieder gehört werden.



¹ Hansaton Research Insights: Better Hearing in Quiet (2025).

² Soft SpeechBoost EIN ggü. AUS; ruhige Hörumgebungen; hörgeschädigte Erwachsene; mittelschwerer bis hochgradiger Hörverlust; Sprache aus einer Entfernung von 4 m



Eine tolle Aussicht genießen,
von der auch die
Daheimgebliebenen erfahren
sollen? Kein Problem!

Konnektivität: stabil, schnell, universell

Konnektivität ist mehr als nur eine Funktion. Sie ist das Bindeglied, das uns in engem Kontakt mit den wirklich wichtigen Dingen hält.

Hansaton Essenz setzt mit dem neuen, ultra-schnellen, ERA Chip von Sonova neue Maßstäbe für Konnektivität. Mit einer bis zu 6 Mal höheren Übertragungsleistung ermöglicht dieser Chip freihändiges Telefonieren und Streamen ohne Unterbrechungen. Und das im Optimalfall bei doppelt so hoher Reichweite.



Nahtloses Umschalten vom Lieblingslied
zum Lieblingsmenschen



**Stabiles freihändiges Telefonieren
und Streamen** genießen



Bedienung des Mobiltelefons durch
zweifaches Antippen des Ohrs



Erweiterbar dank **optionalem Zubehör**,
wie Roger™ Mikrofonen, TV Connector,
PartnerMic und Remote Control

Hansaton Essenz kann Kunden dabei helfen, in Verbindung zu
bleiben. Mit jedem Mobiltelefon.¹

¹ Smartphones und traditionelle Mobiltelefone mit kompatiblen Bluetooth-Profilen
Sämtliche Vergleiche beziehen sich auf eine Gegenüberstellung mit den Vorgängerprodukten von Hansaton.




Personalisierung leicht gemacht

Machen Sie sich die Erkenntnisse von **DataLogging** und **Lifestyle Analyzer** zunutze, um ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden zu entwickeln. Damit fällt die Entscheidung für ein Performance Level, das auf den Alltag Ihrer Kunden zugeschnitten ist, deutlich leichter. Dies schafft Sicherheit bei der Auswahl des Hörsystems und unterstützt Ihre Empfehlung mit objektiven Daten.

Mit unserer intuitiven **stream remote App** können Kunden ihr Hörerlebnis ganz einfach personalisieren. Empfehlen Sie je nach individuellen Vorlieben entweder den klassischen oder den erweiterten Modus.


- Spontane Anpassungen mit nur einem Tastendruck
- Personalisierung des Hörerlebnisses mit situationsbezogenen App-Programmen
- Integrierter Schrittzähler, der Ihre Kunden auf all ihren Wegen begleitet
- Lifestyle Analyzer für Einblicke in den Höralltag

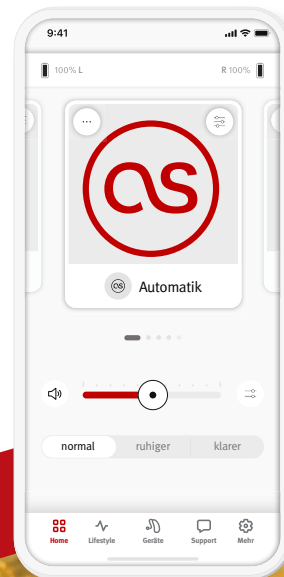

Mein Hörsystem finden

Geben Sie Ihren Kunden die in der stream remote App enthaltenen Hilfsmittel an die Hand, die für Sicherheit und Komfort sorgen. Mit der Funktion **Mein Hörsystem finden** genießen Ihre Kunden die Gewissheit, dass sie auf Unterstützung zählen können, sollten sie ihre Hörsysteme einmal verlegen.

- **Ortung des letzten bekannten Standorts mit der Karte:**
Die App speichert den Standort, an dem die Hörsysteme zuletzt verbunden waren und bietet damit einen hilfreichen Ausgangspunkt für die Suche.
- **Lokalisierung der Hörsysteme:** Sobald Kunden sich den Hörsystemen annähern, zieht die App deren Signalstärke heran, um sie positionsgenau zu ihren Systemen zu lotsen.

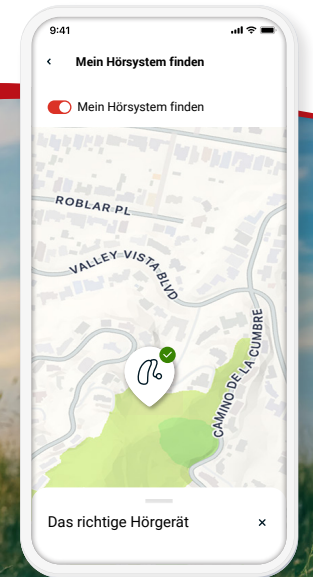

Hansaton Essenz – wiederaufladbare RIC-Hörsysteme


Energie für den ganzen Tag¹



Neues Sound Delivery System 6.0 (SDS 6.0)

Dieses Portfolio von bewährten Hörertechnologien und Ohrpasstücken bildet die Grundlage für eine zuverlässige akustische Ankopplung:

- Schlauchlängen: 00, 0, 1, 2, 3
- Neuer 8-poliger Verbinder mit Rastmechanismus
- CeruStop™ Cerumenschutzsystem
- Open, Vented, Cap und Power Domes mit **AI Dome Proposer**

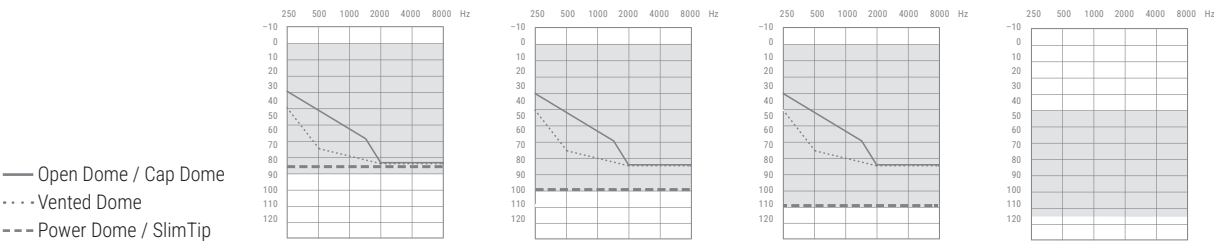

Receiver-Typ	S	M	P	UP
LAmx/Vmax (2cc)	112 / 47	114 / 51	122 / 59	132 / 71



Easy Line ChargerGo RIC S

- Integrierter Akku für mobiles Laden mit LED für Akkuladezustand
- Magnetische Einsetzfunktion für Hörsysteme



Easy Line Charger RIC S

- USB-Ladegerät
- Magnetische Einsetzfunktion für Hörsysteme

¹ Bis zu 16 Stunden, davon 8 Stunden Hören, 4 Stunden Bluetooth-Streaming und 4 Stunden TV-Streaming

Für Sie und Ihre Kunden konzipierte Lösungen



Zuverlässigkeit bei jedem Wetter

Ansprechende und anwenderfreundliche Designs

- Neue anwenderfreundliche Ladestation mit magnetischer Einsetzfunktion und optionalem ChargerGo für mobiles Laden
- Mit Sorgfalt konzipierte Hörsysteme mit eleganten Farboptionen, um die Individualität Ihrer Kundinnen und Kunden zu unterstreichen
- Leicht einsetzbare Hörer mit SDS 6.0 und AI Dome Proposer

Technologie, auf die Verlass ist¹

- In erster Instanz werden die Systeme durch die Plasmabeschichtung des Gehäuses geschützt.
- Eine in die Hörsysteme integrierte Parylene-Beschichtung schützt die internen elektronischen Bauteile gegen Eindringen von Feuchtigkeit und Staub.
- Der Lithium-Ionen-Akku ist vollständig gekapselt und sorgt durch seine wenigen Eintrittspunkte für zusätzlichen Schutz.

Ein großartiges Erlebnis – von Beginn an

- Passen Sie die Systeme mit der anwenderfreundlichen scout Anpasssoftware an und beraten Sie Ihre Kunden mit dem Lifestyle Analyzer.
- Nehmen Sie mithilfe von AutomaticREM genaue In-situ-Messungen vor.
- Bieten Sie Ihren Kunden die Reinigungs- und Pflegeprodukte von Hadeo an, um sicherzustellen, dass sie viele Jahre lang Freude an ihren Hörsystemen haben.

¹ Mit mehr als 10 000 Stunden und über 135 strengen Einzeltests entwickelt und getestet. Sonova unterzieht alle unsere Produkte den 135 strengen Einzeltests.



Hansaton scout Anpasssoftware

Nutzen Sie einen Erfolgsgaranten, der bereits von der ersten Anpassung an eine herausragende Leistung bietet.

- **FocussedFit Workflow:** optimierte Schritte für eine Erstanpassung mit hoher Kundenakzeptanz, die Ihnen Zeit sparen
- **Intelligent Acclimatization:** Hörkomfort durch allmähliche Anpassung der Verstärkung, womit sich die Zielpegel innerhalb weniger Wochen erreichen lassen
- **AutomaticREM:** höhere Zufriedenheit und Akzeptanz der Kunden dank genauer In-situ-Messungen
- **KI-Dome-Proposer:** passende Dome-Empfehlungen basierend auf KI-Modellen, die anhand von Tausenden von erfolgreichen Anpassungen angelernt wurden



Lifestyle Analyzer: datengestützte Erkenntnisse

Die Auswahl des passenden Performance Levels ist Grundvoraussetzung für die Zufriedenheit von Kunden mit ihren Hörsystemen. Kunden fällt es häufig schwer, ihre akustischen Umgebungen adäquat zu beschreiben. Der **Lifestyle Analyzer** überwacht ihre Hörumgebungen und zeichnet die in der jeweiligen Umgebung verbrachte Zeit auf. Die Funktion protokolliert außerdem, wie häufig Sprache prozentual betrachtet von vorne, von links, von hinten oder von rechts kommt.

Mit den Visualisierungen von Hansaton scout können Sie Ihre Kunden aktiv in den Entscheidungsprozess einbinden, indem Sie ihnen eine objektive Gegenüberstellung von Performance Levels und ihrem individuellen Höralltag vorlegen.

8 von 10 Hörakustikern gaben an, dass Lifestyle Analyzer Folgendes ermöglicht:¹

- Proaktive Beratung
- Anpassung höherer Performance Levels
- Unterstützung bei der Empfehlung des optimalen Performance Levels

Personalisierte Daten erleichtern Ihnen und Ihren Kundinnen und Kunden die Entscheidungen.

¹ Pilotstudie von Sonova (2018).

Kabellose Mikrofone und Zubehör

Ihre Kunden können mit praktischen Roger Mikrofonen und Zubehör noch mehr Freiheiten genießen. Diese Produkte erleichtern das Hörverständnis und machen es möglich, noch mehr Audioquellen zu nutzen. Auch sind sie allesamt für eine einfache Anbindung optimiert.



Roger Select™

Roger On™

Remote Control

PartnerMic

Schwierigkeiten in Bezug auf Unterhaltungen bei Hintergrundgeräuschen und/oder auf Distanz gehören zu den gängigsten Beschwerden von Menschen mit Hörverlust.^{1,2} Die Platzierung eines kabellosen Mikrofons wie Roger™ in Sprechernähe bietet einige wesentliche Vorteile:

- Verbesserung des Sprachverstehens in geräuschvoller Umgebung und auf Distanz³
- Wirksame Reduzierung der Distanz zwischen sprechender und hörender Person
- Ausgleich der Auswirkungen von Hintergrundgeräuschen und Hall



TV Connector

- Überträgt den Ton des Fernsehers direkt und automatisch per Stream an die Hörsysteme.
- Gleich mehrere Personen können in den Genuss einer erstklassigen Klangqualität kommen und gemeinsam fernsehen oder Musik hören.
- Überträgt den Ton auch noch in Abständen von bis zu 15 Metern zu den Hörsystemen.



¹ Kochkin, S. (2011). MarketTrak VIII: Mini-BTEs tap new market, users more satisfied. Hearing Journal, 64(3), 17-24.

² Abrams, H., & Kihm, J. (2015). An introduction to MarketTrak IX: A new baseline for the hearing aid market. Hearing Review, 22(6), 16-21.

³ Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

Performance Level

Performance Level	9 First	7 Business	5 Comfort	3 Economy	1 Lower Economy
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>HearIntelligence 6.0 mit Hansaton Essenz Klangverarbeitung</div></div>	✓	✓	✓	✓	✓
<div><div>AS</div><div>Intelligent AutoSurround KI-gestütztes Automatikprogramm, das die akustische Umgebung erkennt und sich optimal daran anpasst</div></div>					
Intelligent AutoSurround	8	6	4	2	
Sprache im lauten Störgeräusch	✓				
Sprache in großen Gruppen	✓				
Sprache in kleinen Gruppen	✓	✓			
Musik	✓	✓			
Ruhige Umgebung	✓	✓	✓		
Laute Umgebung	✓	✓	✓		
Sprache in geräuschvoller Umgebung	✓	✓	✓	✓	
Sprache in ruhiger Umgebung	✓	✓	✓	✓	✓ ¹
AutoStream (SpeechStream, MusicStream)	✓	✓	✓	✓	✓
<div><div></div><div>Fokussierung auf Sprache Sprachanhebung mit Fokussierung auf die sprechende Person</div></div>					
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>StereoBeam</div></div>	✓	✓ ²			
Dynamic SpeechBeam	✓				
SpeechBeam		✓			
Dynamic SpeechBeam im Auto	✓				
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>Directional SpeechBoost</div></div>	✓				
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>Soft SpeechBoost</div></div>	✓	✓	✓		
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>SpeechBoost</div></div>	✓	✓	✓	✓	✓
SoundRestore Frequenzkompression	✓	✓	✓	✓	✓
<div><div></div><div>Lokalisierung akustischer Signale Lokalisierung wichtiger Geräuschquellen in ruhigen und geräuschvollen Hörumgebungen</div></div>					
SphereSound Natural	✓				
SphereSound	✓	✓	✓		
Pinna Effekt	✓	✓	✓	✓	✓

HearIntelligence 6.0

Performance Level	9 First	7 Business	5 Comfort	3 Economy	1 Lower Economy
<div><div></div><div>Hörkomfort in geräuschvoller Umgebung Unterdrückung von Störgeräuschen für mehr Komfort in allen Situationen</div></div>					
Intelligent NoiseReduction	✓	✓			
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>Störgeräuschunterdrückung</div></div>	✓	✓	✓	✓	✓
Sound Impulse Manager			✓		
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>Active Wind Block</div></div>			✓		
FeedbackManager			✓		
Tinnitus Manager			✓		
<div><div></div><div>Personalisierte Anpassungen Anwenderfreundliche App und Anpassoftware für eine optimale Klangverarbeitung</div></div>					
Kanäle (G/AGC)	20	20	16	12	12
FocussedFit	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent Acclimatization	✓	✓	✓	✓	✓
DataLogging	✓	✓	✓	✓	✓
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>Lifestyle Analyzer</div></div>			✓		
<div><div>NEU</div><div>AI Dome Proposer</div></div>			✓		
<div><div></div><div>Kabellose Konnektivität Schnelle und intuitive Anbindungsmöglichkeiten mit intelligenten Multimedia-Lösungen</div></div>					
BiPhone	✓	✓	✓	✓	
Tap Control	✓	✓	✓	✓	
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>Universelle Konnektivität</div></div>			✓		
BiLink			✓		
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>Freihändiges Telefonieren mit Bluetooth®</div></div>			✓		
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>Media-Streaming mit Bluetooth®</div></div>			✓		
TV Connector			✓		
PartnerMic			✓		
Remote Control			✓		
RogerDirect™			✓		
<div><div>AKTUALI- SIERT</div><div>Stream Remote App</div></div>			✓		
<div><div>NEU</div><div>Mein Hörsystem finden</div></div>			✓		

¹ AutomaticMic
² In einem manuellen Programm verfügbar

Gemeinsam bewegen wir etwas

Wir bei Hansaton arbeiten leidenschaftlich gerne mit Hörakustikern zusammen, um all jene zu unterstützen, die auf Hörsysteme angewiesen sind. Zusammen kultivieren wir eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Innovation und gemeinsamer Hingabe beruht.

Anspruchsvolle Designs für ausgewählte Partnerinnen und Partner

Wir sind stolz auf die individuelle Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen und Partnern. Heben auch Sie sich mit einer einzigartigen Marke und anspruchsvollen Designs ab.

Bewährte Tradition, globale Reichweite

Die Hörsysteme von Hansaton sind in mehr als 60 Ländern auf sechs Kontinenten erhältlich. Sie verkörpern unsere deutsche Tradition im Zusammenspiel mit dem beispiellosen Sachverstand von Sonova – ein Erfolgsrezept, mit dem wir unseren Partnerinnen und Partnern wie auch unseren Kundinnen und Kunden aus allen Teilen der Welt erstklassige Lösungen bereitstellen.



Weitere Informationen
über Hansaton Essenz



Innovativ aus Tradition: Seit der Gründung von Hansaton im Jahr 1957 stehen wir für ausgezeichnete und innovative Produkte in modernen Designs. Unsere deutsche Tradition zusammen mit der Innovationskraft von Sonova ermöglicht es uns, formschöne, moderne Produkte mit zuverlässiger Spitzentechnologie zu entwickeln.



hansaton.com/pro



Wir treiben den Wandel zu einer ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen Zukunft unserer Betriebe während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Dienstleistungen voran.

sonova.com/nachhaltigkeit