

HANSATON wave

Schenken Sie Ihren Kunden Lebensqualität

Ihre Kunden profitieren von der Möglichkeit ihre Hörsysteme mit ihrem Mobiltelefon* zu verbinden und können die Welt um sich herum mit allen Sinnen genießen.



Die Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllen

Verbessert Gespräche und unterdrückt Störgeräusche

Die HearIntelligence™ Technologie unterstützt das Hörvermögen Ihrer Kunden, in dem sie die eingehenden Geräusche verarbeitet und auf die wesentlichen Komponenten reduziert. Diese werden dann entweder verstärkt oder unterdrückt und sorgen so für ein optimiertes Hörerlebnis.

Design und Leistung bereits im Einstiegssegment

HANSATON kombiniert bei jeder der HANSATON wave Gehäusebauformen eine hohe Performance mit ansprechendem Design. Zur Auswahl stehen ein RIC-Modell, das sehr modisch ist, oder HdO-Modelle, die für ihre Zuverlässigkeit bekannt sind. Ansprechende Designs sorgen dafür, dass sich Ihre Kunden beim Tragen ihrer Hörsysteme wohlfühlen.

Klangoptimierung

Mit dem FocussedFit Workflow können Sie Ihre Kunden schnell auf ihrem Weg zu einem besseren Hörerlebnis unterstützen. Mit dem AcclimatizationManager beginnen Ihre Kund:innen auf einem angenehmen Niveau. Sie können im Laufe der Zeit und mit zunehmender Eingewöhnung manuell die Verstärkung anheben. AutomaticMic ist eine unkomplizierte Lösung, mit der die Richtwirkung automatisch ausgehend vom Geräuschpegel geändert wird, damit Ihre Kunden keine manuellen Bedienvorgänge an ihren Hörsystemen vornehmen müssen.

Unterstützen Sie Ihre Kunden dabei, die wichtigen Momente des Lebens mit allen Sinnen wahrzunehmen.



Kabellose Konnektivitätsmöglichkeiten

Freihändiges Telefonieren und Streaming mit allen Mobiltelefonen oder anderen Bluetooth®-Geräten.*

Unkomplizierte Konnektivität für Ihre Kund:innen:




Konnektivität mit allen Mobiltelefonen

Die Hörsysteme lassen sich im Handumdrehen in unauffällige kabellose Kopfhörer verwandeln. Kunden können Telefonate oder Musik per Stream direkt an ihre Hörsysteme übertragen und bis zu zwei Mobiltelefone oder Tablets gleichzeitig verbinden*.

Personalisiertes Hörerlebnis

Ihre Kunden können mit unserer Smartphone-App, die eine gute Mischung aus schnellen, sinnvollen Anpassungen und fortschrittlichen Feinabstimmungsoptionen bietet, ihre eigenen persönlichen Einstellungen in Einzelsituationen vornehmen.

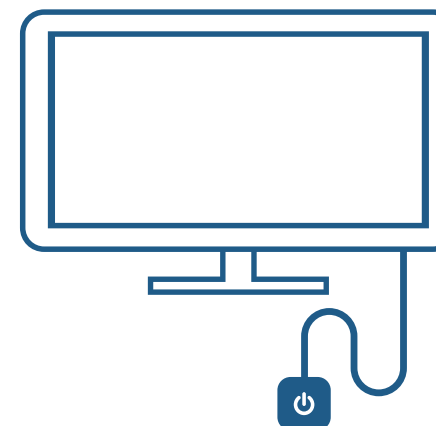

TV Connector

Kunden können ihre Lieblingsfilme und Fernsehprogramme genießen oder die Nachrichten schauen. Der TV Connector überträgt den Ton von ihrem Fernseher oder anderen Audiogeräten direkt an ihre Hörsysteme.

* Smartphones und Mobiltelefone mit kompatiblen Bluetooth®-Profilen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Elegantes und zweckmäßiges Design für die Bedürfnisse Ihrer Kunden

HANSATON wave bietet 1 RIC- und 3 HdO-Hörsystemlösungen. Dies ermöglicht es Ihnen, ein Spektrum an Hörverlusten – von leicht bis hochgradig – anzupassen und so die Bedürfnisse von einer Vielzahl Ihrer Kunden zu erfüllen.

HANSATON wave deckt eine große Bandbreite an Hörverlusten ab und verfügt über ansprechende Designs, die den Anforderungen Ihrer Kund:innen entsprechen.



Wasser- und staubresistent

Diese Hörsysteme sind mit einer speziellen, besonders hochwertigen Plasmabeschichtung ausgestattet. Sie sehen elegant und modern aus und sind nach IP68-Klassifizierung staub- und wasserresistent.

HANSATON wave R312 RIC-Hörsystem

Das HANSATON wave R312 Hörsystem eignet sich für leichten bis hochgradigen Hörverlust.



	S Hörer	M Hörer	P Hörer	UP Hörer
LAmaz / Vmax (2-ccm-Kuppler)	111 / 47	114 / 51	122 / 59	132 / 71
Anpassbereiche				

HANSATON wave 312 M HdO-Hörsystem

Das HANSATON wave 312 M Hörsystem eignet sich für leichten bis mittelgradigen Hörverlust.




	M Hörer
LAmaz / Vmax (2-ccm-Kuppler) Hörwinkel	128 / 63
LAmaz / Vmax (2-ccm-Kuppler) Slim Tube	122 / 58
Anpassbereich	

HANSATON wave 13 SP HdO-Hörsystem

Das HANSATON wave 13 SP Hörsystem eignet sich für leichte bis hochgradige Hörverluste.

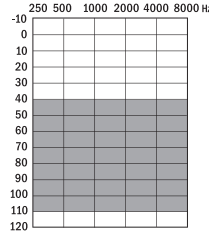


SP Hörer	
LAmaz / Vmax (2-ccm-Kuppler) Hörwinkel mit Filter	133 / 75
LAmaz / Vmax (2-ccm-Kuppler) Hörwinkel ohne Filter	139 / 81
Anpassbereich	
	

HANSATON wave 675 UP HdO-Hörsystem

Das HANSATON wave 675 UP Hörsystem eignet sich für mittlere bis stark hochgradige Hörverluste.

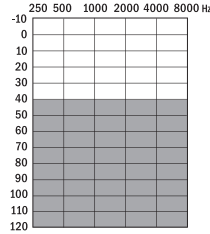

UP Hörer	
LAmaz / Vmax (2-ccm-Kuppler) Hörwinkel mit Filter	134 / 78
LAmaz / Vmax (2-ccm-Kuppler) Hörwinkel ohne Filter	141 / 84
Anpassbereich	
	

HEAR IntelligenceTM

Die HearIntelligenceTM Technologie wurde von HANSATON entwickelt, um die natürliche Hörintelligenz des menschlichen Gehörs mit verbesserten Funktionen und Prozessen zu unterstützen und zu reproduzieren.

Fokussierung auf Sprache

- ✓ AutomaticMic
- ✓ ConversationLift
- ✓ SoundRestore Frequenzkompression

Hörkomfort in geräuschvoller Umgebung

- ✓ Störgeräuschunterdrückung
- ✓ Sound Impulse Manager
- ✓ Rückkopplungsmanager

Personalisierte Anpassungen

- ✓ 12 Kanäle
- ✓ FocussedFit
- ✓ Intelligent Acclimatization
- ✓ DataLogging
- ✓ Bis zu 4 manuelle Programme

Kabellose Konnektivität

- ✓ Made For All (MFA)
- ✓ Freihändiges Telefonieren mit Bluetooth®
- ✓ Media-Streaming mit Bluetooth
 - SpeechStream
 - MusicStream
- ✓ Kopplung von bis zu 8 Bluetooth-Geräten
- ✓ Gleichzeitige Verbindung mit bis zu 2 Bluetooth-Geräten
- ✓ Optionales Zubehör:
 - TV Connector
 - PartnerMic
 - Remote Control
- ✓ Kompatibel mit Stream Remote App
- ✓ BiLink
- ✓ Anzeige für Unterbrechung der binauralen Verbindung





Innovativ aus Tradition: Seit der Gründung von HANSATON im Jahr 1957 stehen wir für ausgezeichnete und innovative Produkte in modernen Designs. Unsere Leidenschaft und tägliche Motivation ist es, gemeinsam mit unseren Hörakustik-Partnern weltweit, Menschen mit Hörminderung einzigartige Hörerlebnisse zu ermöglichen und Lebensqualität zu schenken. Als Business-Partner stehen wir Ihnen mit individuellen Lösungen und Konzepten kompetent und professionell zur Seite. Unsere deutsche Tradition zusammen mit der Innovationskraft von Sonova ermöglicht es uns, formschöne, moderne Produkte mit herausragender Spitzentechnologie zu entwickeln.



Wir treiben den Wandel zu einer ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen Zukunft unserer Betriebe während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Dienstleistungen voran.

sonova.com/nachhaltigkeit