

Mains-libres
Appels vidéo
Bluetooth

2.4



Binaural

Détection	9 (First)	7 (Business)	5 (Comfort)
SurroundSupervisor SHD	•	•	•
Localisation et focalisation	9 (First)	7 (Business)	5 (Comfort)
SphereSound SHD Dynamique	•		
SpeechBeam SHD-3	•		
SphereSound SHD Personnalisé	•	•	
SpeechBeam SHD-2	•	•	
SphereSound SHD Statique	•	•	•
SpeechBeam SHD-1	•	•	•
Séparation	9 (First)	7 (Business)	5 (Comfort)
Musique	•	•	
Bruit	•	•	•
Conversations dans un petit groupe	•	•	•
Conversations dans une foule	•	•	•
Conversations dans le bruit	•	•	•
Conversations dans le calme	•	•	•
Calme	•	•	•
AutoSurround SHD	7	7	6
Optimisation et confort	9 (First)	7 (Business)	5 (Comfort)
SurroundOptimizer SHD	•	•	•
Gestionnaire d'acclimatation	•	•	•
ConversationLift+	•	•	•
Gestionnaire des bruits parasites	•	•	•
Gestionnaire de l'effet Larsen	•	•	•
Gestionnaire de son impulsionnel SHD	•	•	•
Gestionnaire du bruit du vent	•	•	•
Compression fréquentielle	•	•	•
DataLogging	•	•	•
Tinnitus Manager	•	•	•
PhoneConnect*	•	•	•
BiLink	•	•	•
BiPhone*	•	•	•
Bluetooth**	•	•	•
Canaux et programmes	9 (First)	7 (Business)	5 (Comfort)
Canaux (G/AGC)	20	16	12
Programmes (AutoSurround SHD/Manuel/Wireless*)	7/3/3	7/3/3	6/3/3
Programmes sound SHD stream (AutoSurround SHD/Manuel/Wireless*)	7/3/2	7/3/2	6/3/2

* non disponible pour sound SHD stream ** connexion directe sans accessoires pour sound SHD stream



Hansaton - Sonova France SAS - 19 Rue des Frères Rémy - 57200 Sarreguemines - France
Téléphone : 03.87.95.42.00 - Fax : 03.87.95.53.00
E-mail : info@hansaton.fr - Internet : www.hansaton.fr

Informations techniques.
RIC, BTE et ITE dotés de la technologie SphereHD.



Binaural HearIntelligence™

Enfin une aide auditive binaurale dotée d'une connectivité directe 2.4 GHz compatible avec tous les téléphones Bluetooth.



sound SHD stream

Enfin une aide auditive binaurale dotée d'une connectivité directe 2,4 GHz compatible avec tous les téléphones Bluetooth.*

Aujourd'hui, de nouveaux modes de communication voient le jour et évoluent très vite, prenant de plus en plus de place dans notre quotidien. sound SHD stream a été créé pour permettre au patient de rester connecté : fonction mains-libres, appels vidéo et connexion à son téléviseur. En un seul clic sur le bouton poussoir, le son du smartphone ou de la télévision arrivera directement dans les aides auditives car sound SHD stream a les mêmes fonctionnalités qu'une oreillette Bluetooth. Se connecter au monde sans changer son quotidien et en toute simplicité : voici le futur de vos patients !

Comme toutes les aides auditives HearIntelligence™ by HANSATON, sound SHD stream est également doté d'un traitement binaural afin d'offrir à vos patients une personnalisation de l'expérience auditive et une optimisation de l'orientation dans l'espace.

Aidez vos patients à retrouver une audition naturelle et un bien-être au quotidien.

La nouvelle génération d'aides auditives connectées :

- Une aide auditive binaurale qui procure une expérience auditive naturelle tout en étant connecté au monde
- La technologie 2,4 GHz permet une connexion à une télévision, une tablette, un ordinateur ou un smartphone Bluetooth®*

Nouveau

sound SHD S13 stream : le bouton-poussoir simple d'utilisation permet de prendre les appels téléphoniques très facilement. Le compartiment pile a été spécialement conçu pour une ouverture aisée.



* Avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones utilisant une version plus ancienne de Bluetooth®.

La nouvelle génération d'aides auditives connectées.



SurroundSupervisor SHD

SurroundSupervisor SHD de HANSATON utilise plus de 30 capteurs de haute résolution pour analyser l'environnement acoustique près de 700 fois par seconde, créant ainsi un modèle réaliste de la zone environnante qui sert de point de départ au traitement des signaux sonores.

AutoSurround SHD

AutoSurround SHD est un programme qui adapte automatiquement les paramètres du système auditif à un environnement précis. Grand avantage: au lieu d'utiliser des programmes prédéfinis, AutoSurround SHD crée l'association de réglages qui correspond le mieux à la situation.



SphereSound SHD

La fonction SphereSound SHD permet aux systèmes auditifs de recréer l'influence exercée par l'oreille et le cerveau sur les sons, pour une expérience auditive naturelle et une localisation précise des voix et des diverses sources sonores.



SpeechBeam SHD

SpeechBeam SHD se concentre sur la conversation en cours, quelle que soit la direction depuis laquelle provient la voix. Associé à des algorithmes de localisation inédits, ce système permet d'obtenir une compréhension vocale d'une clarté cristalline et un confort d'audition supérieur.



SurroundOptimizer SHD

SurroundOptimizer SHD allie amplification vocale, suppression du bruit ambiant et micro directionnel intelligent dans différents environnements acoustiques pour une audition naturelle adaptée à toutes les situations.




Binaural HearIntelligence et technologie 2.4 GHz

La nouvelle génération d'aides auditives connectées.

sound SHD stream répond aux besoins vos patients « connectés » et leur offre la connexion directe à leur smartphone ou à leur télévision en toute simplicité. En plus de cette connectivité à tous les téléphones Bluetooth®, la possibilité d'effectuer des appels mains-libres est un réel plaisir. Le rêve d'une utilisation en toute sécurité est enfin devenu réalité.

Grâce à la binauralité, vos patients profiteront au quotidien d'une meilleure orientation dans l'espace et d'une écoute plus naturelle. Les différentes fonctions innovantes HearIntelligence™ leurs procureront un confort d'écoute inégalé.

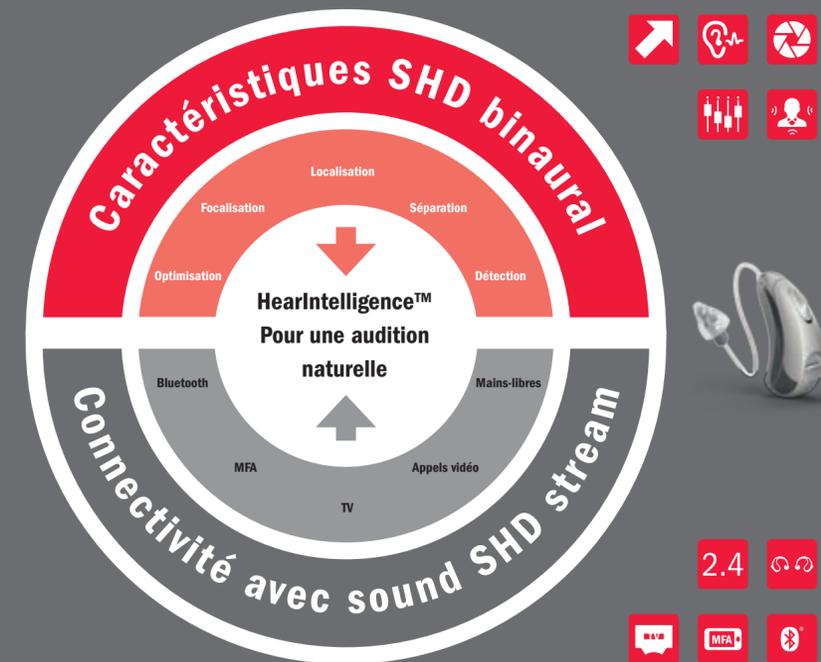

Le son de la télévision directement dans les aides auditives

Grâce à notre TV Connector, les télévisions se connectent en toute simplicité aux aides auditives sound SHD stream. Avec une expérience auditive binaurale exceptionnelle, les films et les séries télé seront diffusés directement dans les 2 aides auditives avec une qualité sonore optimale (jusqu'à 15m d'éloignement).

La nouvelle génération d'aides auditives connectées.



Les appels téléphoniques d'une simple pression du doigt.

Une aide auditive MFA : Made For All. sound SHD stream permet de gérer les appels sans aucune intervention sur le téléphone : répondre ou rejeter les appels se fait en un seul clic. Grâce à son microphone intégré, l'aide auditive se transforme en une oreillette sans fil Bluetooth, avec une portée allant jusqu'à 5 mètres!

La nouvelle génération d'aides auditives connectées.



Des appels vidéos en toute simplicité

sound SHD stream se connecte aux assistants vocaux des smartphone, comme « OK Google » ou encore Siri pour Apple. Et pour pallier à l'éloignement des êtres chers, les fonctionnalités du sound SHD stream permettent également de recevoir les appels vidéos en un seul clic.

La nouvelle génération d'aides auditives connectées.



*Avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones utilisant une version plus ancienne de Bluetooth®.