

STRATOS

EXPLOREZ DE NOUVELLES
GALAXIES AUDITIVES



HANSATON
hearing & emotions



Une étoile est née

Votre aide auditive pour un nouveau sentiment de liberté

Innovant par tradition: : depuis la création de HANSATON, nous développons des solutions auditives innovantes au design sophistiqué pour vous offrir une plus grande liberté.

Avec STRATOS, notre nouvelle étoile, nous continuons sur cette voie et nous vous offrons une audition sereine au quotidien grâce à notre nouvelle technologie de pointe et à des accessoires pratiques. Le design élégant et chic des aides auditives HANSATON vous mettra en valeur.

Nous vous invitons à nous rejoindre...


Apprenez-en plus sur l'audition et sur notre technologie HearIntelligence™. Votre audioprothésiste est disponible pour vous aider et vous conseiller.

Explorons maintenant comment STRATOS peut embellir votre futur.

L'importance de bien entendre

Une bonne audition est un élément important pour votre qualité de vie. Elle vous permet de mener une vie active, de vous sentir plus à l'aise et d'être plus sûr de vous, même en présence d'un grand nombre de personnes ou dans un lieu bruyant. Une bonne audition stimule de surcroît votre cerveau.

Profitez pleinement de votre vie grâce à une meilleure audition

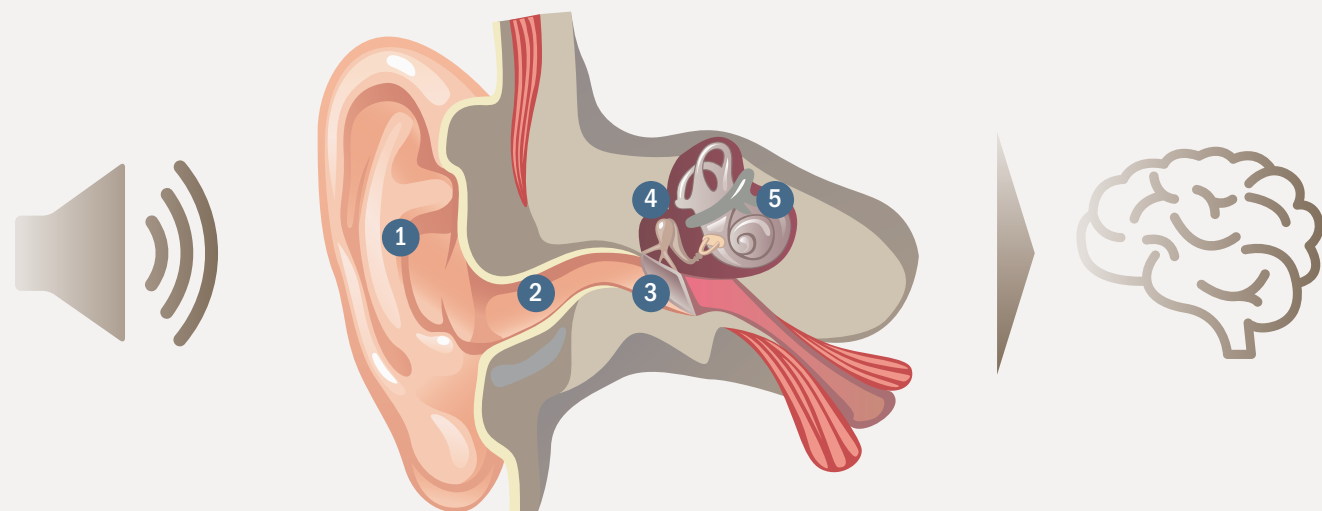

Comment fonctionne l'audition ?



Comment les aides auditives peuvent-elles améliorer votre mode de vie ?

Une tranquillité au quotidien

Votre cerveau peut, dans une certaine mesure, compenser les pertes auditives, cependant cela peut être fatigant. C'est pourquoi la fatigue est souvent un effet secondaire des pertes auditives. Une aide auditive peut améliorer les situations exigeantes sur le plan acoustique, ce qui facilite la vie quotidienne et augmente ainsi votre bien-être personnel.

Préserver les sons

La perte auditive signifie généralement que certains signaux sonores ne sont plus transmis au cerveau. Le cerveau manque donc d'informations, ce qui rend la compréhension des mots beaucoup plus difficile. Il vous arrive d'entendre quand quelqu'un parle, mais vous ne pouvez pas distinguer clairement les mots. L'utilisation précoce des aides auditives vous permet de continuer à stimuler votre cerveau en lui faisant parvenir les informations dont il a besoin pour comprendre les phrases.

ENTENDEZ-VOUS BIEN ?

- ☐ Éprouvez-vous des difficultés à suivre des conversations calmes, ou est-ce que les gens semblent marmonner ?
- ☐ Éprouvez-vous des difficultés à participer à une conversation au téléphone ou avec une personne qui porte un masque ?
- ☐ Éprouvez-vous des difficultés à percevoir les sons aigus tels que les chants d'oiseaux ?
- ☐ Éprouvez-vous des difficultés à suivre des conversations dans des environnements bruyants, comme des restaurants très fréquentés ?

Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, il est important d'agir immédiatement !

Consultez un audioprothésiste et profitez à nouveau de plus de sons et d'émotions.

EXPLOREZ DE NOUVELLES GALAXIES AUDITIVES

AVEC STRATOS, HANSATON

offre un nouveau niveau
de performances auditives

DÉCOUVREZ LA LIBERTÉ

des batteries rechargeables

BÉNÉFICIEZ DE CONNEXIONS FACILES

à tous les téléphones portables*
avec des appels téléphoniques
mains libres et une application pratique

TROUVEZ VOTRE COMBINAISON IDÉALE

grâce au nouveau Lifestyle Analyser

DES DESIGNS STELLAIRES, pour que vous soyez
fiers de porter les aides auditives STRATOS

*Smartphones et téléphones portables traditionnels
avec fonctionnalité Bluetooth® compatible.
Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc.

Plus facile à utiliser grâce aux nouvelles fonctionnalités de connectivité

Les nouvelles options de connectivité vous offrent plus de choix pour interagir avec vos aides auditives.

Appels
téléphoniques
mains libres
avec n'importe
quel appareil
compatible
Bluetooth® 2

Contrôle tactile : pour accéder facilement aux fonctionnalités Bluetooth

Contrôlez les téléphones portables tout simplement en tapotant deux fois sur l'aide auditive ¹

- Acceptez & mettez fins aux appels téléphoniques
- Lancez & arrêtez la diffusion audio
- Déclenchez votre assistant vocal (par exemple, Siri, Google Now™ service...)

¹ Disponible sur les aides auditives rechargeables STRATOS.

² Smartphones et téléphones portables traditionnels avec fonctionnalité Bluetooth® compatible. Siri est une marque d'Apple Inc. Google Now service est une marque de Google LLC.



Une expérience auditive personnalisée

Personnalisez votre expérience d'écoute avec votre smartphone.



Choisissez parmi les nouveaux programmes d'application situationnelle

Nouvelles fonctionnalités de personnalisation du son

Améliorez les conversations en un clic

Réduisez les bruits en un clic


Connectez vos aides auditives à tous les téléphones portables

Transformez vos aides auditives en écouteurs discrets sans fil. Répondez à un appel ou écoutez de la musique en streaming directement sur vos aides auditives. Connectez deux téléphones ou tablettes à la fois. Appréciez la liberté !²



TV Connector

Regardez votre film ou émission TV préféré et soyez sûr de ne rater aucune information importante. Le TV Connector envoie le son de votre TV ou d'autres appareils audio directement sur vos aides auditives. Personne n'aura besoin de répéter que le son de la TV est trop fort.

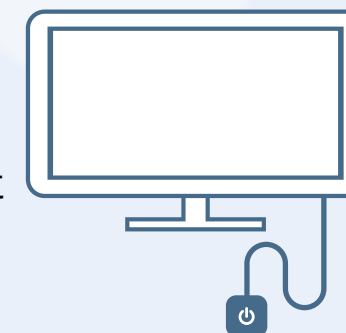

Profitez de l'assurance d'une écoute ininterrompue

La liberté des batteries rechargeables

Atteignez les étoiles et découvrez la liberté que les batteries rechargeables peuvent vous apporter¹

- ▶ Avec la technologie avancée lithium-ion rechargeable, plus besoin de changer les batteries
- ▶ Les 24 heures d'autonomie vous procurent la sérénité nécessaire pour apprécier la vie au quotidien
- ▶ Seulement trois heures pour recharger la batterie au maximum
- ▶ La batterie atteint une charge de 80 % en seulement 1 h30
- ▶ Moins de déchets grâce aux batteries rechargeables

¹ Valable pour les aides auditives AQ sound ST R et AQ round ST RT.

Rechargeable : 24 heures d'autonomie

Déplacez-vous en toute liberté grâce aux aides auditives rechargeables



COMFORT CHARGER

Ce Comfort Charger est à la fois un chargeur et un étui de protection rigide. Grâce aux capsules déshydratantes HADEO, il sèche également les aides auditives lorsqu'il est fermé.
Pour charger, pour protéger et pour sécher !

COMFORT POWER PACK

Grâce à sa batterie lithium-ion intégrée, le Comfort Power Pack peut charger des aides auditives jusqu'à sept fois, pour une charge en déplacement facile toute la journée.
Une recharge nomade !

ECRIN DE CHARGE

Le chargeur HANSATON allie confort de charge et taille réduite. Vos aides auditives peuvent être chargées en un temps de charge de trois heures maximum.
Petit mais puissant !



Autonomie de la recharge (chargement de 0 % à 100 % en seulement 3 heures²)

24 heures : sans streaming
16 heures : technologie AirStream (TV Connector/PartnerMic)
11 heures : téléphone et musique en streaming Bluetooth®

² Le temps de charge réel dépend de l'autonomie restante, mais ne dépassera pas 3 heures.

HearIntelligence™ améliore votre expérience auditive

La technologie HearIntelligence a été développée par HANSATON pour prendre en compte la complexité de l'audition naturelle dans sa globalité.

La technologie HearIntelligence détecte l'environnement sonore au plus près de l'audition naturelle. Elle utilise des fonctionnalités innovantes pour soutenir les interactions complexes entre le son entrant, les organes de l'audition et le cerveau. Les fonctionnalités interagissent en parfaite harmonie pour recréer une audition multidimensionnelle et s'adapter à de nombreux environnements sonores dans plusieurs situations sociales.

La technologie STRATOS intègre des fonctionnalités spécialement développées pour vous fournir la meilleure expérience auditive possible et vous procurer une toute nouvelle qualité de vie avec votre famille et vos amis.*

Les aides auditives STRATOS améliorent les capacités auditives en s'appuyant sur un modèle naturel.



AUTOSURROUND
INTELLIGENT



TRAITEMENT
DE LA PAROLE



LOCALISATION DES
SIGNAUX SONORES



HEAR Intelligence™

optimise l'expérience auditive



DU CONFORT
DANS LE BRUIT



AJUSTEMENTS
PERSONNALISÉS




CONNECTIVITÉ
SANS FIL

*Source : « Évaluation des coûts sociaux et économiques des troubles de l'audition », octobre 2006, Hear-it AISBL.

Toutes les nouvelles performances sonores avec STRATOS

Le niveau qui vous convient

NIVEAUX DE PERFORMANCE

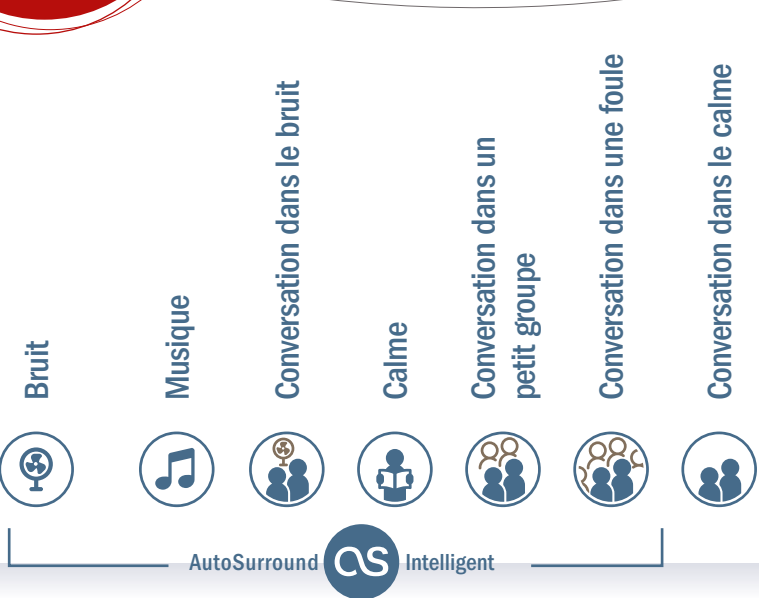

9


FIRST
Votre patient est actif et doit communiquer avec beaucoup de personnes tout au long de la journée dans des environnements bruyants.

7

BUSINESS
Votre patient participe à des événements en petits groupes et apprécie faire du shopping ou aller au théâtre

5

COMFORT
Votre patient passe la majeure partie de son temps à la maison ou dans un environnement calme, mais il doit pouvoir entendre ses proches lorsqu'ils lui parlent.

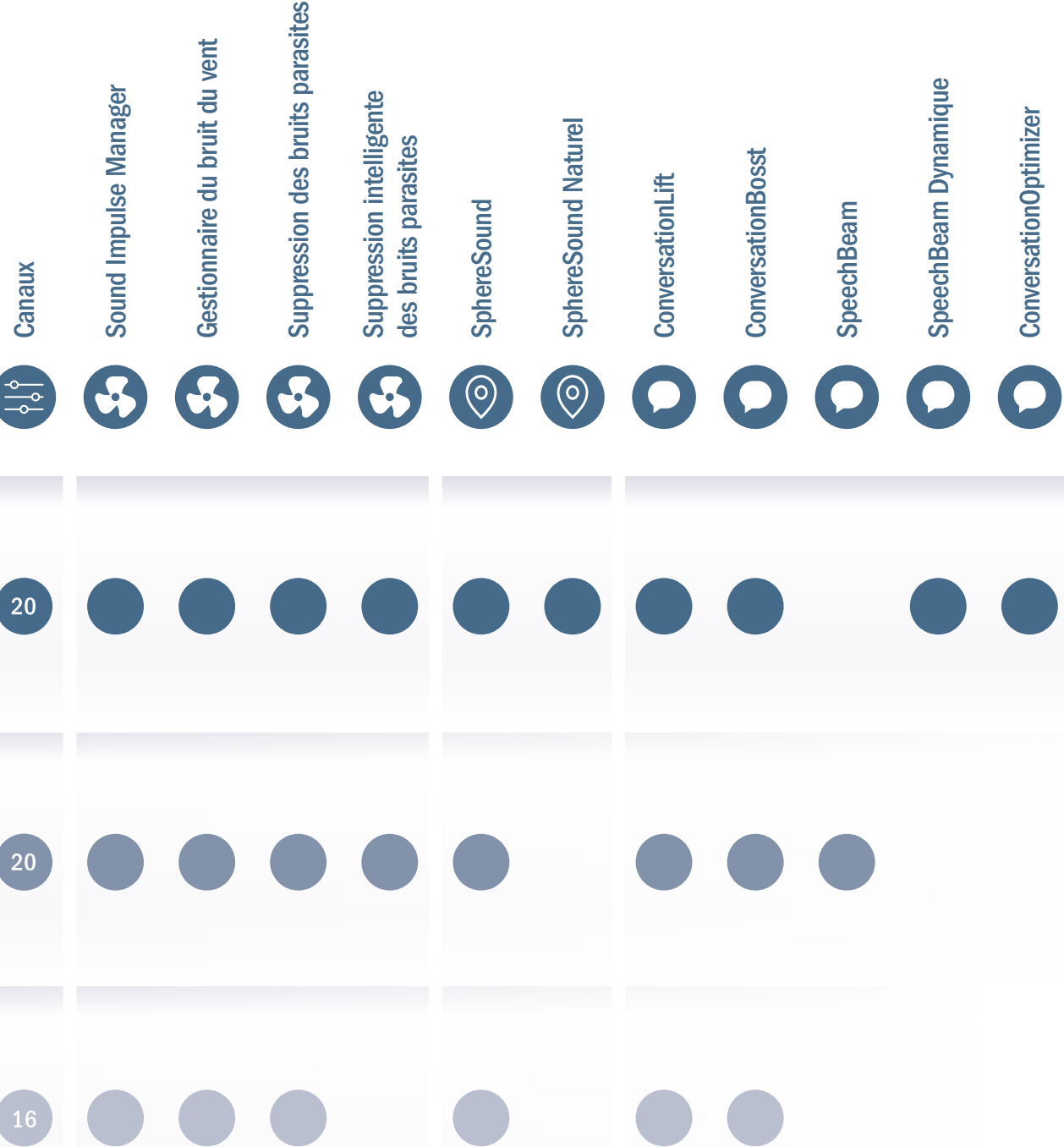

Notre offre en détail...

Il existe une option adaptée à votre style de vie.
Consultez les attentivement.


Description		Votre avantage
AUTOSURROUND INTELLIGENT		
AutoSurround intelligent	AutoSurround Intelligent détecte automatiquement les types de situations d'écoute dans lesquelles vous vous trouvez et les classe selon 7 types d'environnements, puis optimise de manière appropriée les fonctionnalités et réglages de vos aides auditives.	Vous rencontrerez un grand nombre de situations d'écoute dans votre vie quotidienne et AutoSurround Intelligent se chargera d'ajuster vos aides auditives automatiquement pour vous. Vous pourriez même oublier que vous les portez... jusqu'à ce que vous les enleviez et entendiez la différence.
DU CONFORT DANS LE BRUIT		
Sound Impulse Manager	Les bruits impulsionnels sont très rapidement détectés et réduits du signal sans diminuer les sons de la parole.	Les sons tels que les coups bruyants, les tintements de clés ou les claquements de vaisselle peuvent être assez forts et agressifs. Sound Impulse Manager réduit rapidement ces sons pour qu'ils ne soient pas gênants tout en préservant les sons de la parole.
Gestionnaire du bruit du vent	Le vent est détecté et l'intensité de son bruit réduite en fonction de sa force.	Si le bruit du vent devient très fort et gênant, notre Gestionnaire du bruit du vent le détecte et réduit son intensité, par exemple quand vous faites du vélo ou que vous vous promenez par temps venteux.
Suppression des bruits parasites	Les bruits parasites sont détectés... et leur intensité réduite.	Un grand nombre de bruits parasites nous accompagnent dans notre quotidien (par ex. appareils électroménagers, embouteillages). Les aides auditives amplifient les sons, y compris ces bruits parasites, si bien qu'il est important de disposer d'une bonne fonction de Suppression des bruits parasites qui les isole et les réduit.
Suppression intelligente des bruits parasites	Grâce à sa capacité de reconnaissance binaurale des voix à 360°, la Suppression des bruits parasites aide vos patients à se concentrer sur leur interlocuteur dans les environnements d'écoute difficiles	La Suppression intelligente des bruits parasites est conçue pour mettre en valeur la parole de face en supprimant les bruits de fond intenses qui proviennent de côté et de derrière, comme le bruit d'un aspirateur ou d'un mixeur.
LOCALISATION DES SIGNAUX SONORES		
SphereSound	Les aides auditives captent les sources sonores à l'aide de micros qui ne sont pas collés au tympan. SphereSound traite notamment les sons faibles à moyens de la même manière que l'oreille naturelle	Il est important de savoir déterminer la direction réelle des sons que l'on entend, par exemple pour savoir où se trouve un téléphone qui sonne ou pour déterminer d'où viennent des véhicules qui approchent. SphereSound permet de garder des repères liés à la localisation des sources sonores.
SphereSound Naturel	Pour les situations bruyantes, SphereSound Naturel applique un filtre au son en fonction de la direction d'où proviennent les paroles pour faire coïncider le filtre naturel de l'oreille avec cette direction.	Savoir d'où vient la parole dans une situation bruyante peut vous aider à identifier l'interlocuteur et à mieux suivre une conversation, vous pouvez ainsi vous détendre et profiter de la vie.
TRAITEMENT DE LA PAROLE		
ConversationLift	La parole d'intensité normale à forte est détectée puis amplifiée.	La parole fait partie des sons les plus importants que les gens veulent entendre. Élever la parole au-dessus du bruit permet d'entendre plus facilement et de mieux profiter des conversations.
ConversationBoost	La parole de faible intensité sonore est détectée puis amplifiée.	Les conversations de faible intensité sonore se produisent sous différentes formes : la voix douce d'un enfant, un secret entre amis, ou une discussion dans laquelle votre interlocuteur parle doucement en raison de son masque. ConversationBoost augmente la parole à faible intensité pour que vous puissiez mieux profiter du moment.
SpeechBeam	La parole provient de l'avant ou de l'arrière. L'accent est mis sur la direction (avant ou arrière) d'où provient le discours et l'importance de l'autre direction est diminuée.	Se réunir avec sa famille et ses amis peut être merveilleux, mais également très bruyant. SpeechBeam peut se concentrer sur l'avant ou l'arrière pour vous aider à apprécier ces précieux instants passés ensemble.
SpeechBeam Dynamique	La parole provient de l'avant, de la gauche, de la droite ou de l'arrière. L'accent est mis sur l'avant ou le côté s'il provient de l'une de ces directions. L'accent est mis sur l'arrière s'il provient de cette direction et diminue le son venant de l'avant.	Les conversations bruyantes et passionnantes peuvent faire partie de vos plus grands moments de plaisir et de vos meilleurs souvenirs. La parole peut provenir de n'importe quelle direction, c'est pourquoi SpeechBeam Dynamique dirige le faisceau directionnel de vos aides auditives de façon à ce que vous puissiez entendre ce qui vient de toutes les directions.
ConversationOptimizer	Dans les situations bruyantes, vos aides auditives se concentrent sur le signal de la parole et augmentent dynamiquement la différence entre son niveau et celui du bruit.	Quand vous participez à une conversation alors que vous vous trouvez au milieu d'une foule ou entouré de bruit, vous souhaitez tout de même entendre suffisamment le discours pour suivre facilement cette conversation. ConversationOptimizer peut vous aider à séparer le discours du bruit, même dans des situations bruyantes.

DE NOUVELLES ÉTOILES À L'HORIZON

L'AIDE AUDITIVE ADAPTÉE
À VOS BESOINS

Découvrez
nos designs
stellaires !

Noir carbone
(U6)

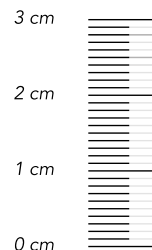

Anthracite métallisé
(UC)

Argent métal (U4)

Brun moka
(UB)

Beige cachemire
(UA)

Des aides auditives « stellaires »

Les performances sonores exceptionnelles de STRATOS vous feront entrer dans de nouvelles sphères auditives avec trois options d'aides auditives différentes.



sound ST R312*

sound ST R312 mesure seulement 2,4 cm de haut : il est quasiment invisible et impressionne par sa technologie puissante et innovante et sa batterie 312 classique.



AQ sound ST R*

AQ sound ST R est notre plus petite merveille rechargeable. Elle mesure 2,5 cm et est dotée d'une batterie lithium-ion rechargeable.



AQ sound ST RT*

Ces aides auditives rechargeables sont également disponibles dans une version équipée d'une bobine téléphonique, AQ sound ST RT, qui mesure 2,8 cm.



Résistantes à l'eau et à la poussière

Dotées d'un revêtement plasma spécial, ces aides auditives ont une apparence élégante et sont résistantes à l'eau et à la poussière conformément à la certification rigoureuse IP68.

* Les aides auditives à côté de la règle sont représentées à taille réelle.

Des options
exceptionnelles
pour votre mode
de vie

Personnalisées pour vous

Chaque oreille a une forme unique. Un embout auriculaire adapté à votre oreille permet un maintien confortable et un ajustement stable dans l'oreille et donc une transmission sans entrave des signaux acoustiques au tympan. Cette option personnalisée permet d'offrir une aide auditive qui fonctionne de manière optimale.

Pour créer votre embout d'oreille personnalisé, votre audioprothésiste prendra une empreinte de votre oreille directement dans son cabinet et vous conseillera sur les nombreuses possibilités de matériaux, de formes et de coloris, selon vos préférences, discrets ou accrocheurs comme des bijoux.

Avantages d'un embout d'oreille personnalisé :

- Maintien confortable
- Un ajustement sur mesure dans le conduit auditif permettant une transmission optimale du signal acoustique au tympan



Des accessoires sans fil pour des moments de détente

Simple à
connecter.
Simple
à utiliser.



TV Connector

Le TV Connector permet de diffuser facilement le son des téléviseurs et d'autres appareils audio telles que les chaînes stéréo directement sur vos aides auditives. Plusieurs personnes équipées d'aides auditives peuvent regarder la TV, voir des films ou bien écouter de la musique à une distance allant jusqu'à 15 mètres de leur TV Connector.*

Télécommande Remote Control

La télécommande Remote Control est design, pratique et facile à utiliser. Ses larges boutons facilitent le réglage du volume. Cet appareil permet également de modifier facilement l'environnement d'écoute ou le programme.



PartnerMic

Ce microphone sans fil, avec son design et ses performances optimisées, peut être facilement fixé sur les vêtements, grâce à son clip intégré. Il offre une excellente qualité sonore et dispose d'une batterie performante. Le PartnerMic est un véritable atout dans des situations acoustiques complexes.

roger

Demandez à votre audioprothésiste des accessoires additionnels tels que les dispositifs Roger™, qui sont une aide précieuse dans les situations d'écoute très difficiles.

* Le TV Connector transmet aussi bien les signaux stéréo que les signaux Dolby. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories. Tous les produits sont représentés en taille réelle.



Nettoyage et entretien HADEO

Grâce à des produits d'entretien spécialement conçus pour les aides auditives, vous pouvez augmenter de manière significative la fonctionnalité et la durée de vie de vos aides auditives. Des produits rapidement efficaces.


Une qualité
exceptionnelle
depuis plus de
40 ans



Nettoyer vos aides auditives


À l'aide des lingettes HADEO

Essuyez vos aides auditives avec une lingette imprégnée HADEO. Cela permet d'éliminer le cérumen et de garder vos aides auditives hygiéniques et propres.

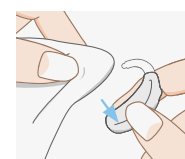

À l'aide du spray HADEO

Vous pouvez également nettoyer vos aides auditives avec le spray nettoyant. Faites particulièrement attention à ne pas pulvériser de liquide dans les ouvertures ou les renforcements.

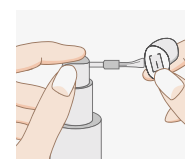

Nettoyer vos embouts d'oreille ou vos embouts fins

À l'aide de pastilles ou de concentré nettoyants


Assurez-vous que vos embouts d'oreille fonctionnent de manière optimale en utilisant régulièrement les pastilles ou le concentré nettoyants pour éliminer le cérumen et garder vos embouts propres et hygiéniques.



Sécher vos aides auditives

À l'aide de pastilles déshydratantes

Elles peuvent être utilisées avec des aides auditives à pile pour s'assurer qu'elles ne deviennent pas humide au fil du temps. Mettez vos aides auditives dans un gobelet de séchage, ajoutez une pastille déshydratante. Le séchage peut être si simple.

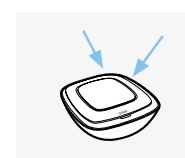

À l'aide de la station de séchage HADEO DRY Mini/DRY Mini UV

La station de séchage DRY mini/DRY mini UV sèche très doucement les aides auditives sans additifs chimiques et utilise très peu d'énergie. Elle est disponible en deux versions, DRY mini avec un séchage par convection et DRY mini UV, où les rayons UVC permettent d'éliminer jusqu'à 99,9 % de germes.

Pour plus d'informations, consultez le guide de nettoyage et d'entretien HADEO.



A pair of gold-rimmed sunglasses with dark lenses is positioned on the left side of the frame. To its right, a pair of silver, behind-the-ear hearing aids with thin wires is shown. The background is a rustic wooden surface. In the lower right, a pair of keys is partially visible, with a red circular callout pointing to them.

EXPLOREZ DE NOUVELLES GALAXIES AUDITIVES.

TOUS LES JOURS !

Avec STRATOS, vous pourrez explorer une nouvelle dimension de l'audition. Des performances plus impressionnantes, plus de fonctionnalités de connectivité et une utilisation facilitée font de ces aides auditives des héroïnes de la vie quotidienne.

Équipées pour
la vie de tous
les jours !

Aides auditives RIC équipées de la technologie STRATOS.
Réveillez votre intelligence auditive naturelle.



Innovant par tradition :

Depuis la création de HANSATON en 1957, nous développons des solutions auditives esthétiquement élégantes et innovantes pour vous offrir davantage de liberté.

www.hansaton.fr