

Des aides auditives « stellaires »

Découvrez des designs exclusifs !


Les performances sonores exceptionnelles de STRATOS vous feront entrer dans de nouvelles sphères de l'audition avec trois options d'aides auditives différentes.



- sound ST R312***
D'une hauteur de 2,4 cm seulement, le sound ST R312 est pratiquement indécélable mais sa technologie innovante et puissante est impressionnante, avec une pile 312 classique.
- AQ sound ST R***
AQ sound ST R est notre plus petite merveille auditive rechargeable. Il mesure 2,5 cm et il est alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable.
- AQ sound ST RT***
Ces aides auditives rechargeables sont également disponibles dans une version dotée d'une bobine téléphonique, AQ sound ST RT, qui mesure 2,8 cm.

Options d'écouteurs S, M, P et UP pour des pertes d'audition légères à profondes.


DISPOSITIFS EN OPTION :
TV Connector, Remote Control, PartnerMic, émetteurs Roger®

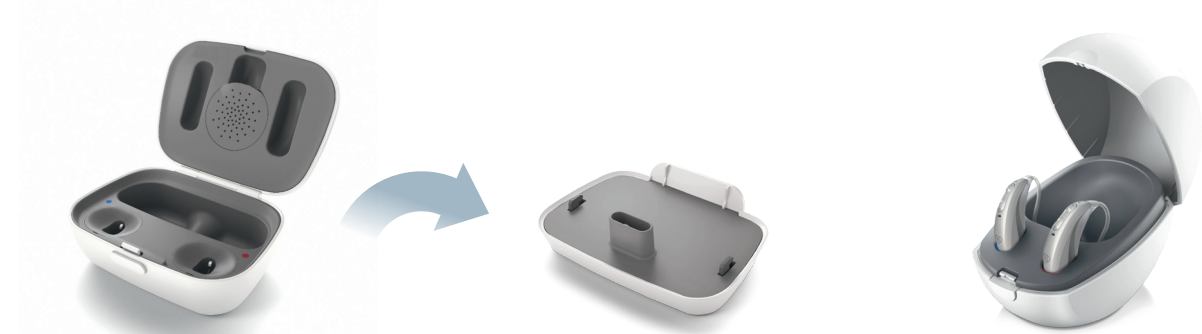

- COMFORT CHARGER**
Chargeur et étui de protection rigide
Pour charger, pour protéger et pour sécher !
- COMFORT POWER PACK**
Batterie lithium-ion intégrée
Une recharge nomade !
- ÉCRIN DE CHARGE**
Charge sous un format compact.
Petit mais puissant !

* Les aides auditives à côté de la règle sont représentées à taille réelle. Toutes les comparaisons font référence aux produits STRATOS et anciennement HANSATON.

Informations techniques destinées aux audioprothésistes
Des aides auditives RIC équipées de la technologie STRATOS

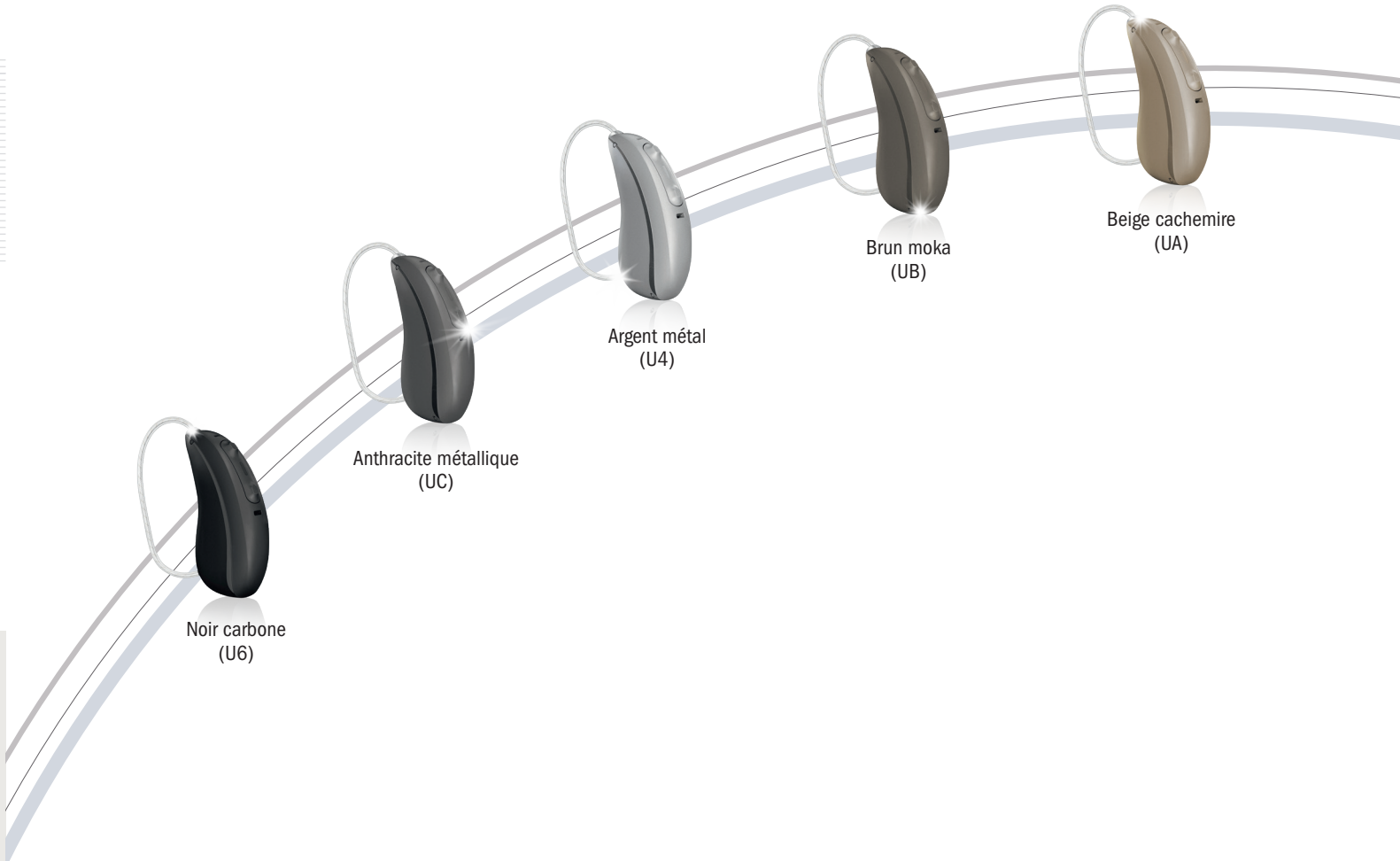

HANSATON est une marque exclusive pour vous et vos patients depuis 1957.

www.hansaton.fr



Sonova AG · Laubisrütstrasse 28
CH 8712 Stäfa · Suisse




STRATOS

EXPLOREZ DE NOUVELLES GALAXIES AUDITIVES



Plus facile à utiliser grâce aux nouvelles fonctionnalités de connectivité

Les nouvelles options de connectivité offrent à vos patients plus de choix pour interagir avec leurs aides auditives.

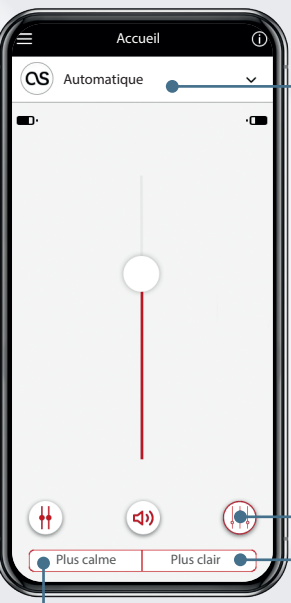


- Choisissez parmi les nouveaux programmes d'application situationnelle
- Nouvelles fonctionnalités de personnalisation du son
- Améliorez les conversations en un clic
- Réduisez les bruits en un clic

Équipés pour la vie de tous les jours !

Expérience auditive facile et personnalisée

- Connectivité Android et iOS Bluetooth®¹ jusqu'à 8 appareils avec 2 connexions simultanées
- Contrôle tactile² pour répondre plus facilement au téléphone ou écouter et arrêter la musique en touchant simplement l'oreille
- Appels téléphoniques mains libres
- Personnalisation de l'expérience d'écoute avec l'application stream remote mise à jour

¹ Smartphones et téléphones portables classiques avec profils Bluetooth® compatibles. Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc.
² Disponible sur les aides auditives rechargeables STRATOS.

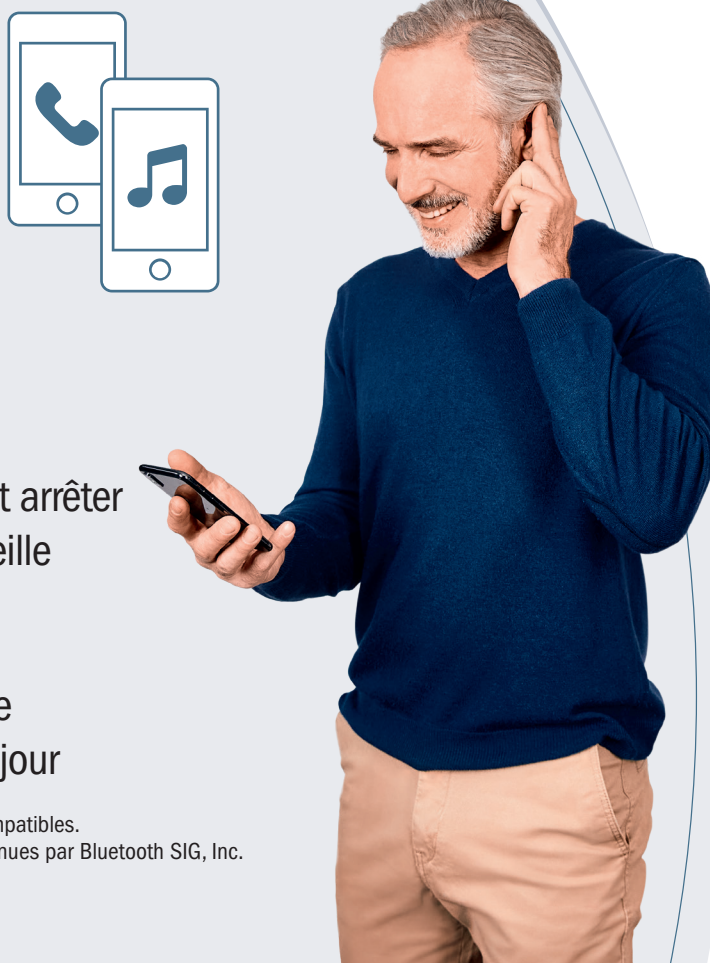

Le bon niveau pour chaque besoin

Toutes les
nouvelles
performances
sonores avec
STRATOS

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Diagram illustrating the range of sound levels from 100 dB (Noise) to 20 dB (Silence):

- 100 dB: Bruit (Noise)
- 90 dB: Musique (Music)
- 80 dB: Conversation dans le bruit (Conversation in noise)
- 70 dB: Calme (Calm)
- 60 dB: Conversation dans un petit groupe (Conversation in a small group)
- 50 dB: Conversation dans une foule (Conversation in a crowd)
- 40 dB: Conversation dans le calme (Conversation in silence)

AutoSurround AS Intelligent

- Canaux
- Sound Impulse Manager
- Gestionnaire du bruit du vent
- Suppression des bruits parasites
- Suppression intelligente des bruits parasites
- SphereSound
- SphereSound Naturel
- ConversationLift
- ConversationBoost
- SpeechBeam
- SpeechBeam Dynamique
- ConversationOptimizer

9

FIRST

Votre patient est **actif** et doit communiquer avec **beaucoup de personnes tout au long de la journée**. Il passe du temps dans des **environnements bruyants**.



20

Response	Percentage
Yes	45%
No	35%
Don't know	20%

7

BUSINESS

Votre patient participe à des
événements en petits groupes
 et apprécie **faire du shopping ou**
aller au théâtre.

20

5

COMFORT

Votre patient passe la majeure partie
 de son temps **à la maison ou dans un
 environnement calme**, mais il doit pouvoir
entendre ses proches lorsqu'ils lui parlent



16

How many people do you know who have been vaccinated?

Aidez vos patients à choisir leur niveau de performance avec le Lifestyle Analyzer HANSATON.



Explorez une nouvelle dimension de Hear Intelligence.

Les avantages pour vos patients

Regardez de plus près nos fonctionnalités
HearIntelligence et leurs avantages pour vos patients.

AUTOSURROUND INTELLIGENT

AutoSurround Intelligent	AutoSurround Intelligent identifie automatiquement les situations d'écoute fréquentes de votre patient, il les classe selon 7 types d'environnements, puis il optimise de manière appropriée les fonctionnalités et réglages des aides auditives.	Les patients rencontrent de nombreuses situations d'écoute différentes dans leur vie quotidienne et AutoSurround Intelligent se charge d'ajuster leurs aides auditives de manière automatique. Ils peuvent même oublier qu'ils les portent... jusqu'à ce qu'ils les enlèvent et entendent la différence.
--------------------------	---	--

DU CONFORT DANS LE BRUIT

Sound Impulse Manager	Les bruits impulsionnels sont très rapidement détectés et réduits du signal sans réduire les sons de la parole.	Les sons tels que les coups bruyants, les tintements de clés ou les claquements de vaisselle peuvent être assez forts et agressifs. Sound Impulse Manager réduit rapidement l'intensité de ces sons pour qu'ils ne soient pas gênants tout en préservant les sons de la parole.
Gestionnaire du bruit du vent	Le vent est détecté et l'intensité de son bruit réduite en fonction de sa force.	Si le bruit du vent devient très fort et gênant, notre Gestionnaire du bruit du vent le détecte et réduit son intensité, par exemple quand vous faites du vélo ou que vous vous promenez par temps venteux.
Suppression des bruits parasites	Les bruits parasites sont détectés... et leur intensité réduite.	Un grand nombre de bruits parasites nous accompagnent dans notre vie quotidienne (par ex. appareils électroménagers, embouteillages). Les aides auditives amplifient les sons, y compris ces bruits parasites, si bien qu'il est important de disposer d'une bonne fonction de suppression des bruits parasites qui les isole et les réduit.
Suppression intelligente des bruits parasites	La Suppression intelligente des bruits parasites utilise la reconnaissance vocale binaurale à 360° et supprime les bruits parasites pour se concentrer sur la parole.	La Suppression intelligente des bruits parasites a été conçue pour accentuer ce que disent les gens devant vous quand le bruit de fond est important, comme lorsque quelqu'un passe l'aspirateur ou utilise un mixeur.

LOCALISATION DES SIGNAUX SONORES

SphereSound	Les aides auditives captent les sons à l'aide de micros qui ne sont pas collés au tympan, si bien que SphereSound traite les sons de la même manière que l'oreille naturelle en fonction de leur direction, notamment les sons faibles à moyens.	Il est important de savoir déterminer la direction réelle des sons que l'on entend, par exemple pour savoir où se trouve un téléphone qui sonne, ou pour déterminer d'où viennent des véhicules qui approchent. SphereSound permet de garder des repères liés à la localisation des sons.
SphereSound Naturel	Pour les situations bruyantes, SphereSound Naturel applique un filtre au son en fonction de la direction d'où proviennent les paroles pour faire coïncider le filtre naturel de l'oreille avec cette direction.	Connaître la provenance des sons dans ces situations bruyantes peut permettre d'identifier un interlocuteur et de suivre une conversation plus facilement : vos patients peuvent se détendre et participer avec plaisir.

TRAITEMENT DE LA PAROLE

ConversationLift	Les discours d'intensité sonore moyenne à forte sont détectés puis amplifiés.	Les discours font partie des sons les plus importants que les gens veulent entendre. Élever ces derniers au-dessus du bruit permet d'entendre plus facilement et de mieux profiter des conversations.
ConversationBoost	Les discours de faible intensité sonore sont détectés puis amplifiés.	Les conversations de faible intensité sonore ont des formes multiples : la voix douce d'un enfant, un secret entre amis, ou une discussion dans laquelle votre interlocuteur parle doucement en raison de son masque. ConversationBoost augmente ces sons doux pour que vos patients puissent mieux profiter du moment.
SpeechBeam	Le discours provient de l'avant ou de l'arrière. L'accent est mis sur la direction (avant ou arrière) d'où provient le discours et l'importance de l'autre direction est diminuée.	Se réunir en famille et avec ses amis peut être merveilleux, mais également très bruyant. SpeechBeam peut se concentrer sur l'avant ou sur l'arrière pour aider vos patients à profiter de ces moments privilégiés.
SpeechBeam Dynamique	La parole provient de l'avant, de la gauche, de la droite ou de l'arrière. L'accent est mis sur l'avant ou le côté s'il provient de l'une de ces directions. L'accent est mis sur l'arrière s'il provient de cette direction et diminue le son venant de l'avant.	Les conversations bruyantes et passionnantes peuvent faire partie des moments les plus amusants et des meilleurs souvenirs. Les paroles peuvent provenir de toutes les directions : SpeechBeam Dynamique oriente donc le faisceau directionnel des aides auditives de vos patients pour qu'ils entendent les sons de toute origine.
ConversationOptimizer	Dans les situations bruyantes, les aides auditives se concentrent sur le signal des paroles et augmentent dynamiquement la différence entre son niveau et celui du bruit.	Lorsque vos patients se trouvent dans une foule ou entourés de bruits, ils souhaitent entendre leur interlocuteur pour pouvoir participer facilement à la conversation. ConversationOptimizer peut vous aider à séparer la parole du bruit, même dans des situations bruyantes.