

STRATOS

ESPLORA NUOVE GALASSIE
DELL'ASCOLTO



PER I
PROFESSIONISTI
DELL'UDITO

A Sonova brand

 **HANSATON**
hearing & emotions



È nata una stella

Apparecchi acustici HANSATON: nuovo livello di libertà

Innovativi per tradizione:

Dalla nascita di HANSATON ad Amburgo, in Germania, ci impegniamo a fornire ai nostri partner esclusivi e ai loro clienti prodotti eccezionali, all'avanguardia e dal design impeccabile.

La nostra passione è aiutare le persone a sentire meglio. Questa nostra passione si traduce in un design esteticamente elegante che consente alle persone di portare i nostri apparecchi acustici con estrema disinvoltura.

STRATOS rappresenta un nuovo incredibile passo avanti in questa magnifica avventura.

Unitevi a noi...

Insieme possiamo fornire design di alta qualità e tecnologia innovativa per un udito ottimale ed emozioni vivide.

ESPLORA NUOVE GALASSIE DELL'ASCOLTO

UN NUOVO LIVELLO DI PRESTAZIONI ACUSTICHE

grazie all'ingegnosa ed innovativa tecnologia
Intelligent NoiseReduction

LIFESTYLE ANALYZER

per una maggiore affidabilità nelle
raccomandazioni sul livello di prestazioni

MAGGIORE FACILITÀ D'USO

con il controllo tattile e nuove funzioni
personalizzate per voi e i vostri clienti

NUOVI DESIGN E COLORI ESCLUSIVI

per gli apparecchi acustici RIC e BTE
che i vostri clienti ameranno

Una nuova dimensione di HearIntelligence™

La tecnologia HearIntelligence è stata sviluppata da HANSATON con l'obiettivo di migliorare le funzioni e i processi naturali dell'udito umano.

La tecnologia HearIntelligence percepisce lo scenario acustico nel modo più simile possibile a quello naturale. Utilizza tecnologie all'avanguardia per agevolare le complesse interazioni tra il suono in ingresso, l'apparato uditivo ed il cervello. Le interazioni fluide tra le diverse funzionalità sono progettate per ricreare un udito multidimensionale per connessioni realistiche con lo scenario acustico circostante in molteplici situazioni sociali.

Grazie al chip PRISM™, dotato del doppio della memoria, le possibilità della tecnologia HearIntelligence si sono notevolmente ampliate e consentono al sistema STRATOS di raggiungere nuovi standard.



**INTELLIGENT
AUTOSURROUND**



**FOCUS
SUL PARLATO**



**LOCALIZZAZIONE DEI
SEGNALI ACUSTICI**



HEAR IntelligenceTM

supporta l'intelligenza uditiva naturale



**COMFORT IN SITUAZIONI
RUMOROSE**

**REGOLAZIONI
PERSONALIZZATE**

**CONNETTIVITÀ
WIRELESS**

HEAR Intelligence™

Vediamo di cosa si tratta...

Apprendi di più sulla tecnologia HearIntelligence™ e su come aiuta i tuoi clienti a tornare in contatto con il mondo che li circonda:



INTELLIGENT AUTOSURROUND

Adattamento continuo allo scenario acustico per una più precisa elaborazione del segnale

I rilevatori acustici monitorano con precisione e rapidità lo scenario acustico circostante centinaia di volte al secondo. Questo avviene automaticamente senza bisogno di interazione, così che il cervello possa concentrarsi più facilmente sull'elaborazione e sull'integrazione dei segnali ricevuti. Gli apparecchi acustici HANSATON rispondono in modo unico e accurato alla varietà dei suoni che circondando l'utilizzatore.

SurroundSupervisor | **AGGIORNAMENTO:** Intelligent AutoSurround | AutoStream (SpeechStream, MusicStream)



FOCUS SUL PARLATO

Rumori di sottofondo attutiti, con focus sul parlato

Le persone senza deficit uditivo sono in grado di escludere i rumori interferenti e concentrare la propria attenzione sulla fonte sonora desiderata. Gli apparecchi acustici dotati di tecnologia HearIntelligence sono progettati per aiutare gli utilizzatori a svolgere questo compito: cioè concentrarsi su chi parla e bloccare i suoni di fondo non rilevanti, indipendentemente dalla direzione da cui provengono. Una maggiore attenzione su chi parla agevola la comprensione senza distrazioni indesiderate.

AGGIORNAMENTO: Dynamic SpeechBeam

AGGIORNAMENTO: SpeechBeam | ConversationOptimizer | ConversationBoost | ConversationLift

Tutti i confronti riportati in questa sezione e nelle successive si riferiscono a STRATOS e ai precedenti prodotti HANSATON.





LOCALIZZAZIONE DEI SEGNALI ACUSTICI

Localizzazione delle fonti sonore per un'esperienza uditiva multidimensionale

Una buona percezione dello spazio è essenziale per chiunque si trovi in un ambiente nuovo o mutevole. La localizzazione delle fonti sonore fornisce punti fissi per l'orientamento spaziale in modo da focalizzare l'attenzione su specifiche fonti sonore. I fattori naturali rilevanti per la localizzazione spaziale, quali la forma dell'orecchio e le dimensioni della testa, sono emulati dalla tecnologia HearIntelligence. Il risultato voluto: ridurre al minimo l'impatto della perdita di alcuni suoni, tipica dell'uso degli apparecchi acustici.

SphereSound Natural | SphereSound



COMFORT IN SITUAZIONI RUMOROSE

Soppressione del rumore di disturbo per un maggiore comfort

Le persone senza deficit di udito sono in grado di focalizzare la propria attenzione sui suoni importanti che vogliono ascoltare, senza lasciarsi distrarre da fastidiosi rumori interferenti. La tecnologia HearIntelligence di HANSATON favorisce questo processo elaborando il suono in entrata e riducendolo ai componenti essenziali che vengono potenziati o soppressi, fornendo un'esperienza uditiva ottimizzata per gli utilizzatori degli apparecchi acustici.

NOVITÀ: Intelligent NoiseReduction | Sound Impulse Manager | Active Wind Block | FeedbackManager | Tinnitus Manager



REGOLAZIONI PERSONALIZZATE

Possibilità di regolazione per un'esperienza uditiva personalizzata e ottimizzata

Gli ambienti acustici sono costituiti da numerose componenti, come il parlato e i livelli costantemente variabili del rumore di fondo. Grazie a questi segnali, il cervello è in grado di determinare quali informazioni sono utili e quali no. Gli apparecchi acustici HANSATON rispondono rapidamente ai cambiamenti dello scenario acustico, anche se significativi e repentini, adattandosi senza distogliere l'attenzione da ciò che è veramente importante. Gli apparecchi acustici HANSATON offrono ciò che tutti desiderano: un approccio che favorisce un primo utilizzo semplice e discreto. I livelli audio si adattano automaticamente nel tempo per raggiungere l'obiettivo richiesto. Gli apparecchi acustici HANSATON sono estremamente confortevoli anche per chi li usa per la prima volta e offrono una valida selezione di apparecchi e livelli di tecnologia; in questo modo passare a un apparecchio acustico è per l'utilizzatore un'esperienza piacevole e non traumatica.

FocussedFit | Intelligent Acclimatization | DataLogging | **NOVITÀ:** Lifestyle Analyzer



CONNETTIVITÀ WIRELESS

Opzioni di interfaccia uniche, soluzioni multimediali intelligenti

Gli utilizzatori degli apparecchi acustici HANSATON non devono rinunciare a connettività rapida e intuitiva con TV e smartphone. Gli apparecchi acustici HANSATON sono progettati con la tecnologia HearIntelligence che favorisce la facilità d'uso e l'eccellente qualità dei toni, anche in applicazioni multimediali diverse tra loro e con requisiti di qualità elevati.

Ideato per tutti i telefoni* | **AGGIORNAMENTO:** Telefonate in vivavoce con Bluetooth® | TV Connector | PartnerMic | Remote Control | RogerDirect™ | **AGGIORNAMENTO:** app stream remote

*Smartphone e telefoni cellulari tradizionali con profili Bluetooth® compatibili.
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Il nostro obiettivo: udito naturale Il risultato: elaborazione acustica vibrante STRATOS

STRATOS consente di
conservare al meglio l'udito
naturale, garantendo l'udibilità
e mettendo in risalto il parlato.



Scoprite la
potenza del
nuovo chip
PRISM™!



Vediamo di cosa si tratta...

Le onde sonore vengono trasmesse al nervo acustico dalla coclea con schemi molto particolari. Questi schemi, unici per frequenza e per livello di input, sono il segreto dell'udito naturale del nostro cervello. Con la perdita uditiva, questi schemi di eccitazione vengono compromessi indebolendo la capacità uditiva naturale dell'uomo.

Replicando il modo in cui le nostre orecchie trasmettono al cervello i suoni da deboli a forti e da bassi ad alti, STRATOS punta a rendere i suoni quanto più possibile naturali. Il nostro obiettivo è riprodurre l'udito naturale, per questo il nostro nuovo modello di elaborazione

vibrante dei suoni è progettato per replicare i modelli di eccitazione della coclea in termini di frequenza e livello.

La nostra elaborazione temporale smussa il guadagno per preservare la dinamica del parlato, fornendo al contempo i livelli necessari per l'udibilità. Con il chip PRISM™, questo algoritmo adattivo può monitorare dal vivo gli onsets e gli inviluppi vocali e i suoni ambientali per adattarsi alla situazione acustica. Questo contribuisce a mantenere l'udibilità dell'inviluppo e della struttura fine del suono, elementi essenziali per sentire sia il parlato che la musica.



**Il nuovo modello di elaborazione vibrante dei suoni
è attivo in tutti i nostri apparecchi acustici STRATOS
fin dal primo adattamento, per offrire ai vostri clienti
un'esperienza di ascolto più naturale e un suono
migliore fin dall'inizio.**

Focus intelligente sul parlato

HANSATON ha raggiunto un nuovo livello di performance uditiva grazie alle innovazioni potenziate con STRATOS.

Dynamic SpeechBeam con Intelligent NoiseReduction



Dynamic SpeechBeam aiuta i vostri clienti a concentrarsi sull'interlocutore in ambienti di ascolto difficili, indipendentemente dalla direzione da cui proviene il discorso, grazie alla capacità di riconoscimento vocale binaurale a 360°.



La tecnologia **Intelligent NoiseReduction** è stata progettata per evidenziare il parlato che proviene frontalmente rispetto all'utilizzatore, eliminando l'intenso rumore di fondo che viene dalle aree laterali e retrostanti.

Insieme, Dynamic SpeechBeam e Intelligent NoiseReduction aiutano i vostri clienti a sentire meglio anche in situazioni con un'acustica non favorevole affinché possano godersi una piacevole conversazione in cucina anche quando preparano un delizioso frullato.



Pronti ad affrontare la vita di tutti i giorni

Esperienze
di ascolto
eccezionali

Intelligent AutoSurround con AutoStream, ConversationOptimizer e ConversationBoost

Basato su sette tipi di ambienti, Intelligent AutoSurround può gestire automaticamente l'adattamento ai cambiamenti delle situazioni sonore. Durante lo streaming da un dispositivo, AutoStream differenzia automaticamente i tipi di suono, così sia il parlato che la musica possono essere trattati in modo esclusivo. Le voci basse e le conversazioni dal tono pacato spesso rappresentano una complessità enorme per le persone audiolese. ConversationBoost identifica i suoni più tenui del parlato e li aumenta rispetto al rumore di fondo per consentire all'utilizzatore di sentire anche le parole pronunciate sottovoce.

Le conversazioni di gruppo con più voci sovrapposte sono tra le situazioni più difficili da affrontare per le persone audiolese. ConversationOptimizer è stato progettato per mettere in risalto il parlato, in particolare a fronte di un rumore di fondo intenso. Dotato della funzionalità di riconoscimento vocale binaurale a 360°, è in grado di mettere a fuoco il parlato anche se le persone che parlano si trovano di lato o da dietro rispetto all'utilizzatore. Fate in modo che al prossimo brindisi i vostri clienti possano partecipare con trasporto e senza barriere.





Aggiornamenti in scout 5.3:

Supporto per il nuovo
HANSATON jazz ST ITEs

L'aggiornato Lifestyle Analyzer
con le nuove informazioni
Speech Locator per aiutare
a selezionare il livello di
prestazioni più adatto alle
esigenze del cliente

La prima impressione conta


Primi adattamenti in scout

Un cliente che indossa un apparecchio acustico per la prima volta può ricevere un'impressione sgradevole. È quindi estremamente importante offrire al cliente un'ottima esperienza uditiva fin dall'inizio: per questo STRATOS è stato progettato da zero per includere Acclimatazione Intelligente dal primo utilizzo alle impostazioni finali. Intelligent Acclimatization estende l'approccio di adattamento BalanceFit di HANSATON per soddisfare le esigenze sia degli utilizzatori alle prime armi che di quelli esperti. La funzione è in grado di regolare

l'equilibrio tra alte e basse frequenze con una maggiore enfasi sulle basse frequenze per gli utilizzatori che indossano gli apparecchi per la prima volta, così da aumentare l'accettazione spontanea. In questo modo è possibile ottenere un suono bilanciato al livello di comfort che si desidera, per poi passare automaticamente e gradualmente al livello desiderato. La facile configurazione di Intelligent Acclimatization nel software scout vi aiuta a garantire un'ottima prima esperienza di per i vostri clienti.

Il livello giusto per ogni esigenza

LIVELLI DI PRESTAZIONE

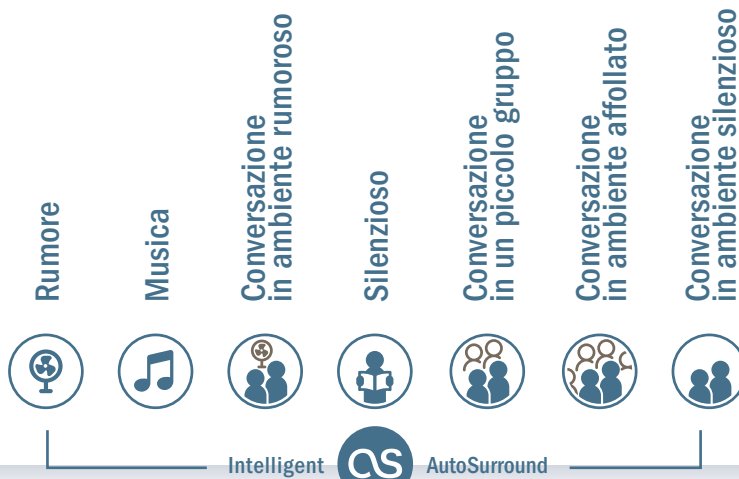

9

FIRST

Per i vostri clienti **particolarmente socievoli**, che apprezzano la **qualità eccellente** e trascorrono il tempo in **tante situazioni di ascolto diverse con molto rumore di fondo**.



7

BUSINESS

Per i vostri clienti essenzialmente **socievoli** che apprezzano la **qualità** e trascorrono il tempo in tante **situazioni di ascolto diverse con un normale rumore di fondo**.



5

COMFORT

Per i vostri clienti **occasionalmente socievoli** che trascorrono il tempo in alcune **situazioni di ascolto diverse con frequente rumore di fondo**.



3

ECONOMY

Per i vostri clienti che trascorrono il tempo in pochissime **situazioni di ascolto diverse con rumore di fondo quasi assente**.




1

LOWER ECONOMY

Per i vostri clienti che trascorrono la maggior parte del tempo in ambienti silenziosi e che possono regolare **manualmente l'apparecchio**.



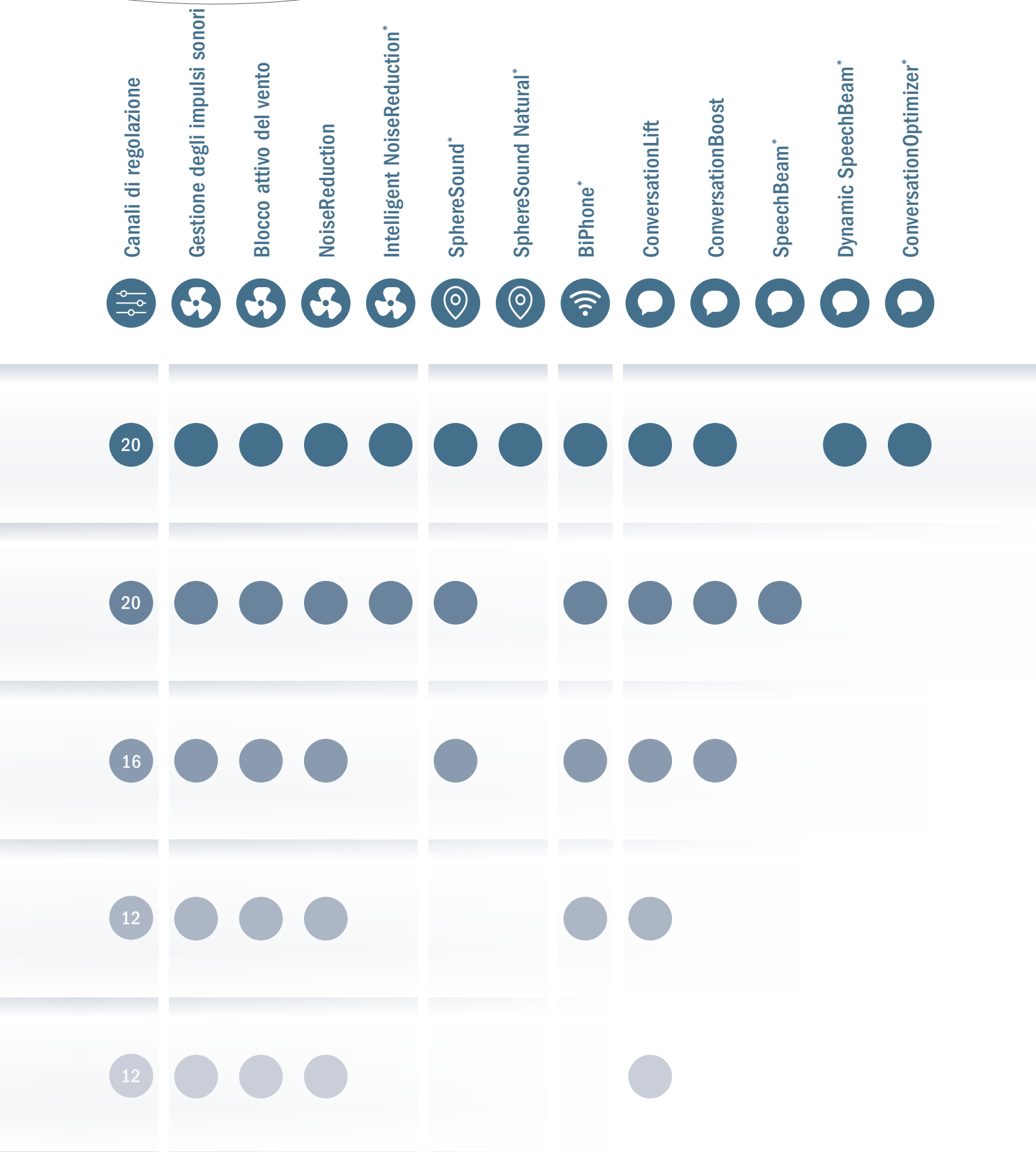

Facilitare le decisioni

Lifestyle Analyzer: Supporta i tuoi clienti nelle loro decisioni sul livello delle prestazioni!

Il nuovo Lifestyle Analyzer è lo strumento ideale con i nuovi clienti: proponete loro myChoice, i dispositivi di prova programmabili di HANSATON, e riesaminate il loro personale stile di vita dopo 1-3 settimane. Sarete in grado di presentare una raccomandazione personalizzata e basata sui fatti per il livello di prestazioni più adatto a loro.


Selezionare il giusto livello di prestazioni è essenziale affinché i vostri clienti ottengano ottimi risultati con i loro apparecchi acustici. Spesso, tuttavia, hanno difficoltà nel descrivere i tipi di situazioni acustiche che incontrano più di frequente. Non sarebbe bello se poteste viaggiare con loro per ascoltare gli ambienti in cui si muovono e scoprire quanto siano generalmente impegnativi?

È esattamente ciò che Lifestyle Analyzer vi permette di fare. Gli apparecchi acustici del vostro cliente sono in grado di monitorare i suoi ambienti di ascolto e riferire quanto tempo trascorre in ciascuno di essi. Le visualizzazioni in scout vi permettono di coinvolgere il vostro cliente nel processo decisionale, semplicemente mostrando con grande oggettività fino a che punto ciascun livello di prestazioni si adatti al suo stile di vita.


Potete attuare la transizione da venditori a consulenti e individuare il livello di prestazioni corretto per il vostro cliente, insieme.

CONSIGLIO

Le nuove informazioni **Speech Locator** possono aiutarvi a selezionare il livello di prestazioni che corrisponde allo stile di ascolto personale del vostro cliente per il parlato e gli altri suoni che lo circondano.

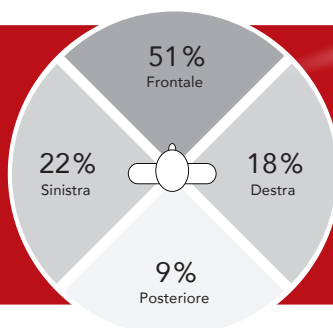

Lifestyle Analyzer and ST 7


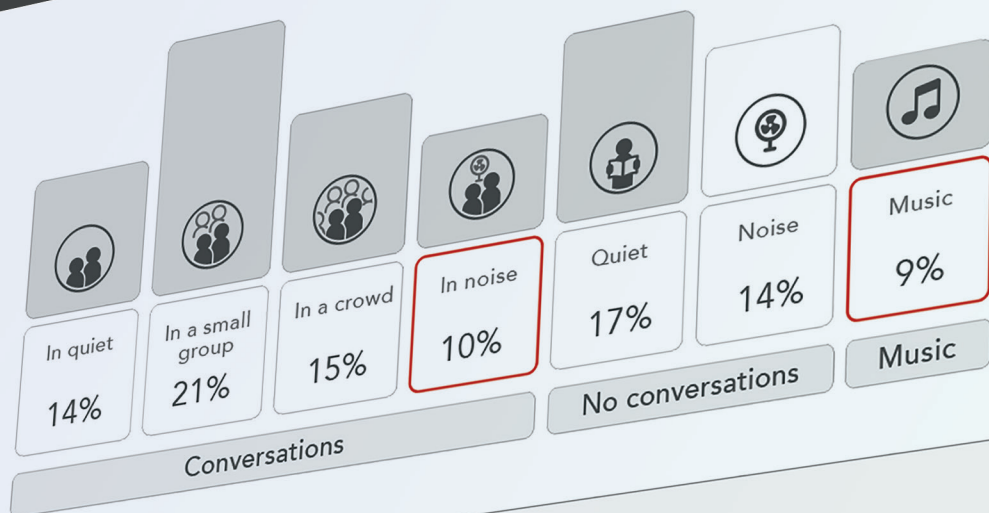


Level Comparison

Feature List

Coverage

Performance

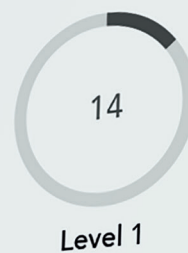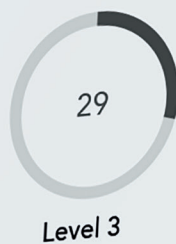

Lifestyle Analyzer vi aiuta ad analizzare, visualizzare e spiegare i diversi livelli di prestazione.

LE NOSTRE STELLE ALL'ORIZZONTE



sound ST R312
Carbone Scuro (U6)



AQ sound ST RT
Antracite metallizzato (UC)



AQ sound ST R
Argento sterling (U4)



AQ beat ST R
Beige (UA)

COLORI COMPLEMENTARI

Un tocco di eleganza grazie al design degli apparecchi
RIC e BTE Hansaton

DESIGN IMPECCABILE

Raffinatezza sofisticata per deliziare i vostri clienti

MODERNO PER TRADIZIONE

HANSATON è sinonimo di apparecchi acustici dal design raffinato



beat ST RT675 UP
Caffè (UB)



jazz ST 312 Dir W
Nero (06)



jazz ST 312
Sabbia (14)




jazz ST 10
Rosa (26)

Apparecchi acustici RIC: dimensioni ridotte, grandi prestazioni




Con le eccezionali prestazioni di STRATOS, i vostri clienti entrano in nuove sfere di ascolto, supportati dalla connettività diretta.

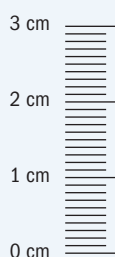

sound ST R312




Con un ingombro di soli 2,4 cm, il sound ST R312 è quasi impercettibile eppure colpisce per la sua tecnologia innovativa e potente e la tradizionale batteria 312.

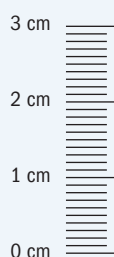

AQ sound ST R



L'AQ sound ST R è il nostro più piccolo prodigio dell'udito ricaricabile. Misura 2,5 cm ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio.




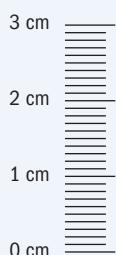


AQ sound ST RT



L'apparecchio acustico ricaricabile è disponibile anche in una versione dotata di bobina telefonica che misura 2,8 cm.

- Cupoletta aperta/
Cupoletta a cappuccio
- Cupoletta ventilata
- Cupoletta doppia/SlimTip

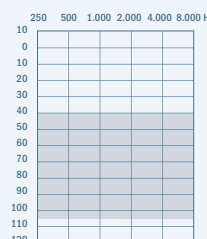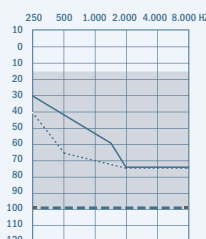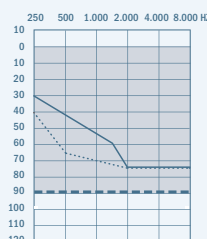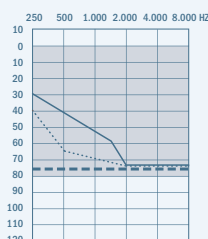

Tipo di ricevitore

Uscita/Guadagno (2 cc)

S

111/47

M

114/51

P

122/59


UP

132/71

Apparecchi acustici BTE: robusti, ricaricabili e connessi




L'AQ beat ST R BTE offre un guadagno maggiore e sfrutta tutti i vantaggi della piattaforma STRATOS.

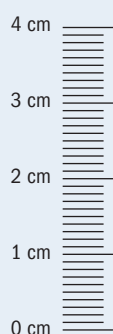

AQ beat ST R

Con 3,3 cm l'AQ beat ST R convince grazie al doppio ricevitore e alla batteria ricaricabile agli ioni di litio.

--- Tubetto sottile

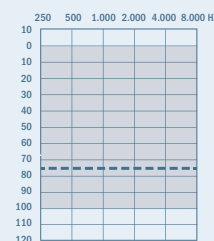

Tipo di ricevitore

P

Uscita/Guadagno (2 cc) curvetta

130/68

Uscita/Guadagno (2 cc) tubetto sottile

129/69


**L'apparecchio
acustico ideale per
ogni esigenza**

Scoprite una
nuova generazione
di sistemi UP!

Apparecchi Ultra Power: stato dell'arte della tecnologia con design all'avanguardia




Sfrutta tutte le possibilità di connettività wireless di STRATOS, dalle telefonate in vivavoce agli accessori e RogerDirect, ora con il nostro BTE Ultra Power.

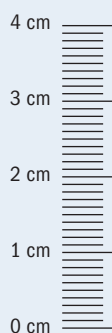

beat ST RT675 UP

Con il ricevitore doppio per un'uscita e un guadagno più elevati (141/84), il beat ST RT675 UP è il prodigio dell'udito BTE dal design moderno più potente di HANSATON. Misura 4,0 cm ed è alimentato da una batteria 675 sostituibile.

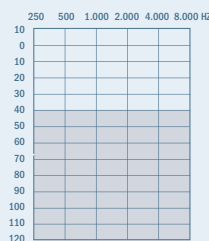

--- Tubetto sottile

Tipo di ricevitore

UP

Uscita/Guadagno (2 cc) curvetta non filtrata

141/84

Uscita/Guadagno (2 cc) curvetta filtrata

134/78

Il prodotto è raffigurato nelle sue dimensioni reali.

Trovate la preimpostazione giusta per voi

Ogni cliente ha esigenze e priorità diverse, soprattutto quando si tratta di apparecchi acustici ultrapotenti. Ecco perché per gli apparecchi acustici UP sono disponibili tre diverse preimpostazioni, capaci di garantire una personalizzazione iniziale ancora più elevata.

Classic	Modern	Active
Il cliente è un portatore di apparecchi acustici di lunga data. I microfoni omni forniscono una base acustica stabile per l'elaborazione classica del suono. L'amplificazione si concentra sull'udibilità dei suoni ambientali e del parlato.	Il cliente è più orientato verso un'elaborazione moderna del segnale e una ridotta direzionalità. Preferisce una maggiore amplificazione con particolare attenzione alla comprensibilità del parlato e alla riduzione dei suoni ambientali.	Il cliente preferisce l'elaborazione attiva del segnale e la massima efficacia delle funzionalità con la massima direzionalità. L'attenzione è rivolta perlopiù alla comprensibilità del parlato e al massimo livello di comfort.

Iniziate a regolare il vostro apparecchio in tutta semplicità con una delle tre preimpostazioni e sfruttate i vantaggi di una regolazione più rapida e di un'accettazione spontanea.

	Classic	Modern	Active
Formula di adattamento	DSLv5	BalanceFit	BalanceFit
Strategia di amplificazione	WDRC	WDRC	WDRC
Strategia di input del microfono	Omni	Fisso ¹	Adattivo ²
ConversationLift	Al di sopra del default	Al di sotto del default	Default
NoiseReduction	Off	Al di sotto del default	Default
AcclimatizationManager	100%	100%	Calcolato
SoundRestore	Calcolato	Calcolato	Calcolato
Gestione degli impulsi sonori	Moderato	Moderato	Moderato

¹ Varia dall'effetto Pinna o SphereSound a direzionale ampio fisso, a seconda del livello di prestazione

² Varia dall'effetto Pinna o SphereSound a direzionale ampio fisso/SpeechBeam/Dynamic SpeechBeam, a seconda del livello di prestazione

Soluzioni acustiche ITE: intelligenti e discrete

Personalizzati
per i tuoi clienti

Le nostre soluzioni personalizzate ITE offrono una elevata performance sonora insieme ad una discrezione unica. Che siano piccoli o trendy, i clienti sperimenteranno prestazioni sonore eccezionali e personalizzate.



jazz ST 10



Jazz ST 10 è il nostro apparecchio acustico su misura più piccolo. Alimentato da una tradizionale batteria 10, offre un formato personalizzato con pulsante opzionale, bobina, e telecomando IIC.



jazz ST 312



Per una maggiore durata della batteria, jazz ST 312, alimentato da una tradizionale pila 312, può essere regolato tramite un controllo del volume o un pulsante e può essere dotato di bobina telefonica opzionale.



jazz ST 312 Dir W



Con tutti i vantaggi della connettività wireless, il jazz ST 312 Dir W combina lo stile personalizzato con le funzioni binaurali e wireless di STRATOS. Alimentato con una pila 312 tradizionale, offre controllo del volume e pulsante opzionali ed è compatibile con telefoni Bluetooth® ed accessori wireless.

● Nero (06)*


● Sabbia (14)

● Cacao (22)


● Rosa (26)

● Marrone (28)


M

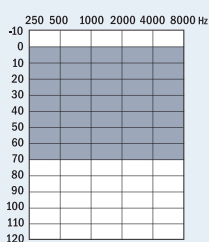


P

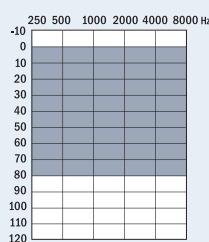

SP

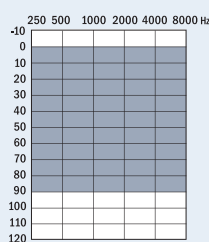

UP

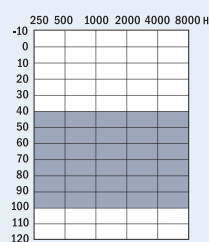

*Solo IIC o jazz ST 312 Dir W
I prodotti sono mostrati in dimensioni reali

TRENDY E WIRELESS



Nascosto in bella vista -
l'edizione nera del jazz ST 312 Dir W
ha l'aspetto di un normale auricolare wireless,
eppure offre tutte le funzionalità e il comfort
degli apparecchi acustici su misura.

Tipo di ricevitore	Uscita/Guadagno (2 cc)	jazz ST 10	jazz ST 312	jazz ST 312 Dir W
M	109/40	(✓)	(✓)	(✓)
P	115/50	✓	✓	✓
SP	119/60	(✓)	(✓)	(✓)
UP	127/70			(✓)
Stili del guscio		IIC/CIC/MC/ITC/HS/FS	IIC/CIC/MC/ITC/HS/FS	MC/ITC/HS/FS

✓ Default (standard) (✓) Opzionale

ESPLORA TUTTA LA NOSTRA FAMIGLIA DI PRODOTTI ACUSTICI PER UNA MAGGIORE GIOIA DI VIVERE

Design stellari per soddisfare un'ampia
gamma di esigenze uditive e stili di vita.

jazz ST 312 Dir W





beat ST RT675 UP

sound ST R312

AQ sound ST R



HADEO Clean & Care line di HANSATON garantisce la durata e un numero minore di interventi di riparazione

Ricaricabile: Fino a 24 ore di autonomia

La tecnologia avanzata agli ioni di litio fornisce agli apparecchi acustici 24 ore di autonomia tra una ricarica e l'altra.



COMFORT CHARGER COMBI

Il Comfort Charger Combi include un caricabatterie ed una custodia rigida protettiva, tutto in uno. Da chiuso consente anche di asciugare gli apparecchi acustici grazie alle capsule di asciugatura HADEO facoltative.

Asciugatura, protezione, ricarica!



COMFORT POWER PACK

Il Comfort Power Pack ha una batteria agli ioni di litio integrata e non rimovibile capace di caricare gli apparecchi acustici fino a sette volte più rapidamente, per una ricarica facile e veloce tutto il giorno.

Libertà in movimento!



CARICABATTERIE HANSATON

Il piccolo caricabatterie HANSATON unisce il comfort della ricarica a un design seducente. Il tempo di ricarica massimo di tre ore consente di caricare gli apparecchi acustici con batterie agli ioni di litio.

Piccolo ma potente!

Caricabatterie compatibili raccomandati

Verificate a colpo d'occhio quali caricabatterie sono compatibili con gli apparecchi acustici STRATOS e aiutate i vostri clienti a fare la scelta giusta per il loro stile di vita.

Caricatore	Caricabatterie Hansaton	Comfort Charger Combi
AQ sound ST R	✓	✓
AQ sound ST RT	✓	✓
AQ beat ST R	✓	



Tempi di ricarica (carica da 0 % a 100 % in meno di 3 ore)

Fino a 24 ore: Senza streaming

Fino a 16 ore: Tecnologia AirStream (TV Connector/PartnerMic)

Fino a 11 ore: cellulare Bluetooth® e musica streaming

Accessori per
ogni situazione
uditiva, facili
da collegare

Accessori wireless per una maggiore libertà

Convincete i vostri clienti con utili accessori che facilitano la comprensione¹ e consentono di utilizzare in modo ottimale più fonti di ascolto.

TV Connector^{2,3}

Il TV Connector facilita l'invio dell'audio da televisori e altri dispositivi audio, come gli impianti stereo, direttamente agli apparecchi acustici. I portatori di apparecchi acustici possono guardare programmi TV e film o ascoltare musica fino a 15 metri di distanza dal TV Connector.



Remote Control³

Il Remote Control è esteticamente gradevole, pratico e facile da usare. I pulsanti grandi e chiari rendono molto intuitiva la regolazione del volume. Grazie a questo dispositivo è possibile modificare l'ambiente o il programma di ascolto con facilità.



PartnerMic³

Il microfono remoto, dal design elegante e dalle prestazioni ottimizzate, può essere facilmente fissato sui vestiti dell'interlocutore grazie alla clip integrata.

Garantisce qualità del suono e prestazioni della batteria eccezionali. Il PartnerMic è una vera risorsa soprattutto in situazioni acusticamente difficili.



RogerDirect™

I portatori di apparecchi acustici possono beneficiare delle collaudate prestazioni della tecnologia Roger™ nel rumore e sulla distanza¹, trasmettendo direttamente agli apparecchi acustici STRATOS. I microfoni Roger sono in grado di individuare la direzione di provenienza del parlato e consentono all'utente di concentrarsi su tutta la conversazione.

¹ Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

² Il TV Connector non accetta solo segnali stereo ma anche segnali Dolby.

Prodotto su licenza da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

³ I prodotti sono raffigurati nelle loro dimensioni reali.



Più facile da usare grazie alle funzioni di connettività

Le nuove opzioni di connettività offrono ai vostri clienti più dimensioni per interagire con i propri apparecchi acustici.



Esperienza uditiva personalizzata

I clienti proprietari di smartphone desiderano poter personalizzare la loro esperienza di ascolto. Forniamo attualmente ai clienti metodi semplici e più avanzati per fare proprio questo.

Nota: le modifiche apportate dai clienti nell'app sono visibili nel software di adattamento scout.

Controllo con tocco¹: facile e agevole per i vostri clienti nelle situazioni quotidiane

Controllo dei dispositivi di telefonia mobile semplicemente toccando due volte l'orecchio:

- accettare e chiudere le chiamate
- riprodurre e mettere in pausa lo streaming audio
- Avviare l'assistente vocale (ad es. Siri, il servizio Google Now™...)

Telefonate a mani libere con qualsiasi dispositivo Bluetooth® 2



Due connessioni in una

Grazie alla funzionalità Bluetooth® migliorata è ora possibile collegare due telefoni o tablet contemporaneamente: ascoltare la musica da un dispositivo e rispondere a una chiamata sull'altro!

¹ Disponibile sugli apparecchi acustici STRATOS ricaricabili.

² Smartphone e telefoni cellulari tradizionali con profili Bluetooth® compatibili. Siri è un marchio di Apple Inc. Il servizio Google Now è un marchio di Google LLC.

STRATOS

Livelli di Prestazione

Livelli di prestazione	9 First	7 Business	5 Comfort	3 Economy	1 Lower Economy
------------------------	------------	---------------	--------------	--------------	-----------------------



AUTOSURROUND INTELLIGENTE

OBIETTIVO: riconoscimento automatico e rapido dello scenario acustico

AGGIORNATO	Intelligent AutoSurround	7	6	4	2	
	Rumore	✓				
	Musica	✓	✓			
	Conversazione in ambiente rumoroso	✓	✓			
	Silenzio	✓	✓	✓		
	Conversazione in un piccolo gruppo	✓	✓	✓		
	Conversazione in ambiente affollato	✓	✓	✓	✓	
	Conversazione in ambiente tranquillo	✓	✓	✓	✓	1
	AutoStream (SpeechStream, MusicStream) ²	✓	✓	✓	✓	✓
	SurroundSupervisor	✓	✓	✓	✓	



FOCUS SUL PARLATO

OBIETTIVO: esclusione dei rumori distraenti, con focus al parlato

NOVITÀ	Dynamic SpeechBeam con l'Intelligent NoiseReduction ²	✓				
NOVITÀ	SpeechBeam con l'Intelligent NoiseReduction ²		✓			
	ConversationOptimizer ²	✓				
	ConversationBoost	✓	✓	✓		
	ConversationLift	✓	✓	✓	✓	✓
	SoundRestore	✓	✓	✓	✓	✓



LOCALIZZAZIONE DEI SEGNALI ACUSTICI²

OBIETTIVO: localizzazione delle sorgenti sonore per un'esperienza uditiva multidimensionale

	SphereSound Natural	✓			
	SphereSound	✓	✓	✓	

¹ AutoMicrophone

² eccetto Jazz ST 10 & Jazz ST 312

Livelli di prestazione	9 First	7 Business	5 Comfort	3 Economy	1 Lower Economy
------------------------	------------	---------------	--------------	--------------	-----------------------



COMFORT IN SITUAZIONI RUMOROSE

OBIETTIVO: soppressione del rumore di disturbo per un maggiore comfort

NoiseReduction	✓	✓	✓	✓	✓
Gestione degli impulsi sonori			✓		
Blocco attivo del vento			✓		
FeedbackManager			✓		
Tinnitus Manager			✓		



REGOLAZIONI PERSONALIZZATE

OBIETTIVO: adattamento continuo allo scenario acustico per un'elaborazione del segnale ottimale

AGGIORNATO	Canali (G/AGC)	20	20	16	12	12
	FocussedFit	✓	✓	✓	✓	✓
	Intelligent Acclimatization	✓	✓	✓	✓	✓
	DataLogging	✓	✓	✓	✓	✓
NOVITÀ	Lifestyle Analyzer			✓		



CONNETTIVITA' WIRELESS²

OBIETTIVO: opzioni di connettività rapida e intuitiva con soluzioni multimediali intelligenti

	BiPhone	✓	✓	✓	✓	
	Progettati per tutti i tipi di telefono			✓		
	BiLink			✓		
AGGIORNATO	Chiamate Bluetooth® in vivavoce			✓		
	Streaming dei media Bluetooth®			✓		
	TV Connector			✓		
	PartnerMic			✓		
	Remote Control			✓		
	RogerDirect™			✓		
AGGIORNATO	App stream remote			✓		



ESPLORA UN NUOVO UNIVERSO NELLE APPLICAZIONI PER L'UDITO.

OGNI GIORNO!

Con STRATOS, ci stiamo lanciando verso una nuova dimensione dell'ascolto. Prestazioni più solide, più funzioni di connettività e un utilizzo ancora più semplice fanno di questi nuovi apparecchi acustici i protagonisti della vita quotidiana.

**Supportate i vostri clienti nel viaggio verso
una nuova esperienza uditiva.**



**Attrezzati
per la vita
quotidiana!**



HANSATON è il marchio esclusivo dedicato a te ed ai tuoi clienti dal 1957.
Le relazioni interpersonali e il vostro successo sono il nostro obiettivo.
Grazie alla nostra eredità culturale tedesca, unita alla forza innovativa
di Sonova, riusciamo a creare prodotti dal design esteticamente
gradevole, basati su una tecnologia all'avanguardia e collaudata.

hansaton.com/it